



LARYVOX® INSERTER

FAHL

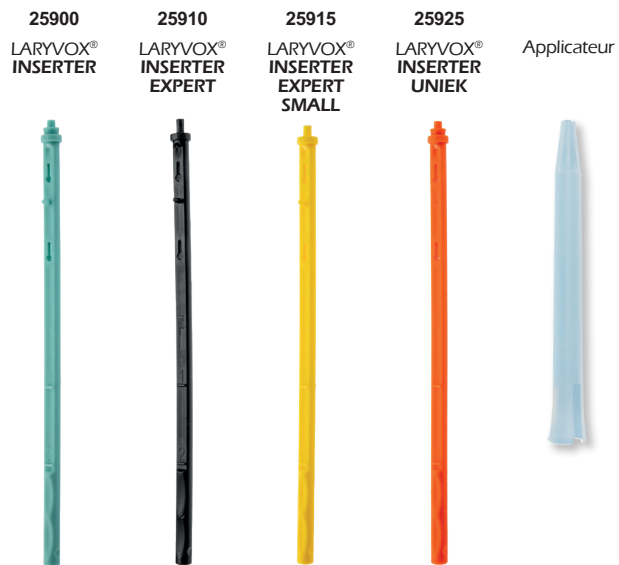

- ▶ Le dispositif **LARYVOX® INSERTER** se compose d'un instrument de positionnement ainsi que d'un applicateur. Il sert au positionnement ou au remplacement antérograde optimal d'une valve de dérivation / prothèse phonatoire :
 - **REF 25900** : pour les prothèses phonatoires avec longueur de tige de 5-14 mm
 - **REF 25910** : pour prothèse phonatoire 16 Fr. et/ ou valve de dérivation Blom-Singer® DUAL VALVE (20 Fr.)
 - **REF 25915** : pour les prothèses phonatoires avec une longueur de tige de 4 mm
 - **REF 25925** : pour prothèse phonatoire/valve de dérivation **LARYVOX® UNIEK**
- ▶ L'instrument de positionnement présente deux (**REF 25925**) ou trois possibilités de fixation différentes permettant un positionnement aisé et sûr de divers types de prothèse phonatoire.
- ▶ L'applicateur permet une introduction aisée de la valve de dérivation et est préparé en quelques étapes
- ▶ La pointe de l'applicateur arrondie contribue de plus à un positionnement en douceur qui rend le changement de prothèse phonatoire aussi agréable que possible.

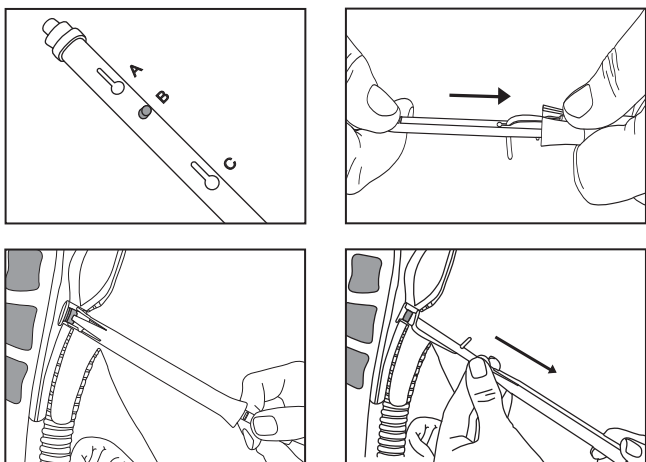

Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH est le distributeur exclusif des produits Blom-Singer® dans certains pays d'Europe. Blom-Singer® est une marque déposée de Freudenberg Medical, LLC.



CONTENU

- ▶ Applicateur
- ▶ Mode d'emploi

LARYVOX® INSERTER REF 25900
1 x instrument de positionnement (turquoise)

ou
LARYVOX® INSERTER EXPERT REF 25910
1 x instrument de positionnement (noir)

ou
LARYVOX® INSERTER EXPERT SMALL REF 25915
1 x instrument de positionnement (jaune)

La prothèse phonatoire doit être commandée séparément et n'est pas fournie. Prière de tenir compte de la notice d'utilisation du fabricant de prothèses phonatoires.

Les kits de prothèse phonatoire **LARYVOX® UNIEK** (REF 25010 et 25020) contiennent :

LARYVOX® INSERTER UNIEK REF 25925
1 x instrument de positionnement (orange)

Produit	Unité	REF
LARYVOX® INSERTER	1 pièce	25900
LARYVOX® INSERTER EXPERT	1 pièce	25910
LARYVOX® INSERTER EXPERT SMALL	1 pièce	25915
LARYVOX® INSERTER UNIEK	1 pièce	25925


LARYVOX® INSERTER

FAHL

25920
LARYVOX®
INSERTER
SPECIAL



Capsules de gel

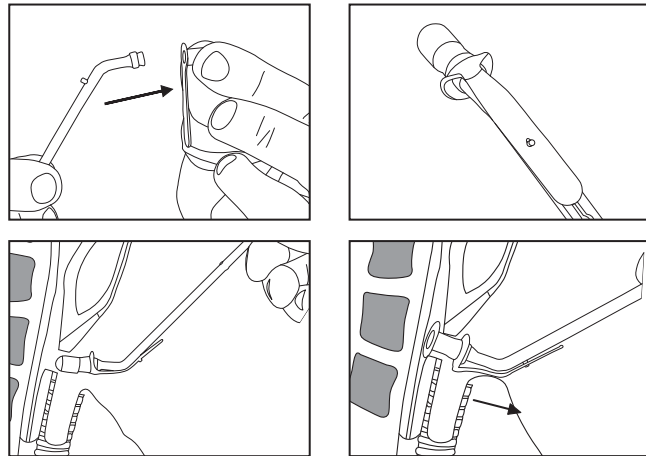

- ▶ **LARYVOX® INSERTER SPECIAL** permet le positionnement ou le remplacement antérograde optimal d'une valve de dérivation / prothèse phonatoire par l'utilisation de la technique à capsule de gel en présence de :
 - fistules profondes ou à canal oblique
 - canal fistulaire étroit
 - trachéostome particulièrement petit à des fins d'optimisation de la visibilité
- ▶ L'instrument de placement dispose d'une possibilité de fixation sûre pour placer facilement et en toute sécurité différents types de valve de dérivation d'un diamètre de 20 French à partir d'une longueur de 5 mm.
- ▶ L'utilisation de la technique à capsule de gel permet une introduction aisée de la prothèse phonatoire
- ▶ La capsule de gel permet d'introduire la valve de dérivation dans le canal de dérivation de manière atraumatique
- ▶ Il est possible d'appliquer une goutte d'anesthésiant local soluble dans l'eau immédiatement avant le positionnement afin d'accélérer la dissolution de la capsule de gel dans l'œsophage
- ▶ Les capsules de gel correspondantes sont disponibles séparément avec les tailles 20 Fr. et 22 Fr.

CONTENU

- ▶ Mode d'emploi

LARYVOX® INSERTER SPECIAL REF 25920
1 x instrument de positionnement (bleu)

Accessoires optionnels:
BLOM-SINGER® REPLACEMENT GEL CAPS REF BE3X9X
Capsules de gel de rechange

La valve de dérivation doit être commandée séparément et n'est pas fournie. Prière de tenir compte de la notice d'utilisation du fabricant de la valve de ventilation.

Produit	Unité	REF
LARYVOX® INSERTER SPECIAL	1 pièce	25920













Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH est le distributeur exclusif des produits Blom-Singer® dans certains pays d'Europe. Blom-Singer® est une marque déposée de Freudenberg Medical, LLC.










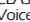
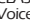
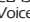
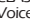
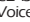

















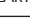


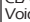














LARYVOX® INSERTER

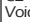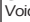AFFECTATION

25900	25910	25915	25920	25925
LARYVOX® INSERTER	LARYVOX® INSERTER EXPERT	LARYVOX® INSERTER EXPERT SMALL	LARYVOX® INSERTER SPECIAL	LARYVOX® INSERTER UNIEK
Coloris				
				
				

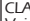Tenir au préalable compte de la longueur (xx) de la prothèse phonatoire à poser.

REF	Désignation	Longeur	INSERTER
20 FRENCH			
AD20xx-NS	ADVANTAGE Indwelling 20 Fr. Voice Prosthesis	06-14 mm	
AD2004-NS	ADVANTAGE Indwelling 20 Fr. Voice Prosthesis	04 mm	
AS20xx-NS	ADVANTAGE Indwelling 20 Fr. Voice Prosthesis	06-14 mm	
AS2004-NS	ADVANTAGE Indwelling 20 Fr. Voice Prosthesis	04 mm	
DV20xx-LF	DUAL VALVE Indwelling LF 20 Fr. Voice Prosthesis	06-14 mm	
DV20xx-NS	DUAL VALVE Indwelling 20 Fr. Voice Prosthesis	06-14 mm	
IN2004-NS	CLASSIC Indwelling 4 mm 20 Fr. Voice Prosthesis	04 mm	
IN20xx-NS	CLASSIC Indwelling 20 Fr. Voice Prosthesis	06-20 mm	
IN2004-LEF	CLASSIC Indwelling LEF 4 mm 20 Fr. Voice Prosthesis	04 mm	
IN20xx-LEF	CLASSIC Indwelling LEF 20 Fr. Voice Prosthesis	06-14 mm	
IN20xx-IR	CLASSIC Indwelling IR 20 Fr. Voice Prosthesis	06-12 mm	
IN2004-LEIR	CLASSIC Indwelling LEIR 20 Fr. 4 mm Voice Prosthesis	04 mm	
IN20xx-LEIR	CLASSIC Indwelling LEIR 20 Fr. Voice Prosthesis	06-08 mm	
IN20xx-LESL	CLASSIC Indwelling LESL 20 Fr. Voice Prosthesis	05 und 07 mm	
IN2004-LETO	TEP Occluder Indw. LETO 20 Fr. 4 mm Voice Prosthesis	04 mm	
IN20xx-LETO	TEP Occluder Indw. LETO 20 Fr. Voice Prosthesis	06-14 mm	
IN2004-LF	CLASSIC Indwelling LF 20 Fr. 4 mm Voice Prosthesis	04 mm	
IN20xx-LF	CLASSIC Indwelling LF 20 Fr. Voice Prosthesis	06-14 mm	
IN20xx-SL	CLASSIC Indwelling SL 20 Fr. Voice Prosthesis	05,07 und 09 mm	
IN20xx-SO	CLASSIC Indwelling STERIL 20 Fr. Voice Prosthesis	08-14 mm	
25020-xx	LARYVOX® Uniek U.L.R.	05-13 mm	
25010-xx	LARYVOX® Uniek U.L.R.	05-13 mm	

REF	Désignation	Longeur	INSERTER
16 FRENCH			
AS1604-NS	ADVANTAGE Indwelling 16 Fr. Voice Prosthesis	04 mm	
AS16xx-NS	ADVANTAGE Indwelling 16 Fr. Voice Prosthesis	06-14 mm	
IN1604-NS	CLASSIC Indwelling 4 mm 16 Fr. Voice Prosthesis	04 mm	
IN16xx-NS	CLASSIC Indwelling 6 mm 16 Fr. Voice Prosthesis	06-20 mm	
IN16xx-SO	CLASSIC Indwelling STERIL 10 mm 16 Fr. Voice Prosthesis	08-14 mm	
IN16xx-IR	CLASSIC Indwelling IR 16 Fr. Voice Prosthesis	06-12 mm	
IN1604-LEF	CLASSIC Indwelling LEF 4 mm 16 Fr. Voice Prosthesis	04 mm	
IN16xx-LEF	CLASSIC Indwelling LEF 16 Fr. Voice Prosthesis	06-14 mm	
IN16xx-LESL	CLASSIC Indwelling LESL 16 Fr. Voice Prosthesis	05 und 07 mm	
IN1604-LETO	CLASSIC Indwelling LETO 4 mm 16 Fr. Voice Prosthesis	04 mm	
IN16xx-LETO	CLASSIC Indwelling LETO 16 Fr. Voice Prosthesis	06-14 mm	
IN1604-LF	CLASSIC Indwelling LF 4 mm 16 Fr. Voice Prosthesis	04 mm	
IN16xx-LF	CLASSIC Indwelling LF 16 Fr. Voice Prosthesis	06-14 mm	
IN16xx-SL	CLASSIC Indwelling SL 16 Fr. Voice Prosthesis	05,07 und 09 mm	
IN16xx-SO	CLASSIC Indwelling STERIL 16 Fr. Voice Prosthesis	08-14 mm	
Utilisation avec la technique du capsules de gel			
IN20xx-NS	CLASSIC Indwelling 20 Fr. Voice Prosthesis	06-20 mm	
AD20xx-NS	ADVANTAGE Indwelling 20 Fr. Voice Prosthesis	06-14 mm	
AS20xx-NS	ADVANTAGE Indwelling 20 Fr. Voice Prosthesis	06-14 mm	
IN20xx-LF	CLASSIC Indwelling LF 20 Fr. Voice Prosthesis	06-14 mm	
IN20xx-LEF	CLASSIC Indwelling LEF 20 Fr. Voice Prosthesis	06-14 mm	
IN20xx-SL	CLASSIC Indwelling SL 20 Fr. Voice Prosthesis	05,07 und 09 mm	
IN20xx-LEIR	CLASSIC Indwelling LEIR 20 Fr. Voice Prosthesis	05 und 07 mm	
IN20xx-LESL	CLASSIC Indwelling LESL 20 Fr. Voice Prosthesis	05 und 07 mm	
IN20xx-IR	CLASSIC Indwelling IR 20 Fr. Voice Prosthesis	06-12 mm	
IN20xx-LETO	TEP Occluder Indw. LETO 20 Fr. Voice Prosthesis	06-14 mm	



Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH est le distributeur exclusif des produits Blom-Singer® dans certains pays d'Europe. Blom-Singer® est une marque déposée de Freudenberg Medical, LLC.