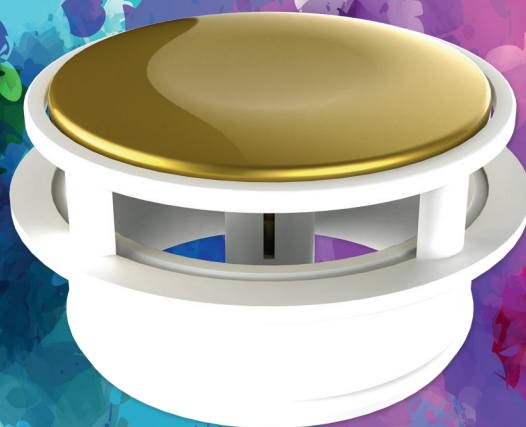


FALH

KLEURSTALENKAART

LARYVOX® MY EXTRA HME



GEEF UW LEVEN KLEUR -

UW PERSOONLIJKE HME-FILTER

GEEF UW LEVEN KLEUR MET DE NIEUWE LARYVOX® MY EXTRA HME

U heeft een laryngectomie ondergaan en draagt regelmatig HME-filters? U bent moedig en verbergt uw tracheostoma niet? De nieuwe LARYVOX® MY EXTRA HME-filter vormt de perfecte keuze voor alle zelfbewuste personen met een laryngectomie! Probeer onze kleurrijke MY EXTRA HME.

De product- en filtereigenschappen komen overeen met die van de klassieke LARYVOX® EXTRA HME. Het enige verschil zit hem in de kleur.

FILTER - VERWARMEN - BEVOCHTIGEN

Om het verlies van de neusademhaling te compenseren wordt regelmatig gebruik van HME-filters aanbevolen. Deze filters worden gebruikt voor warmte- en vochtuitwisseling en filteren de ademlucht om irritatie van de luchtwegen door droge lucht, stof of verontreinigende stoffen in de ademlucht te voorkomen. Na de operatie hebben personen met een tracheotomie / laryngectomie vaak last van een verhoogde slijmproductie en hoestirritatie. Deze symptomen kunnen de ademhaling en de stemrevalidatie nadelig beïnvloeden. Regelmatig gebruik van HME-filtercassettes verzacht de symptomen door het verminderen van kleverige afscheidingen in de luchtwegen en verhoogt de levenskwaliteit.

De filtercassette is bedoeld voor eenmalig gebruik en dient uiterlijk na 24 uur te worden vervangen. LARYVOX® MY EXTRA HME kan zowel overdag als 's nachts worden gedragen.

EENVOUDIGE SPRAAKOPTIE VOOR DRAGERS VAN EEN SHUNTVENTIEL

De LARYVOX® MY EXTRA HME beschikt over een eenvoudig te bedienen spraakoptie voor dragers van een shuntventiel. De afgeronde uitsparing in het deksel van de LARYVOX® MY EXTRA HME vereenvoudigt de gerichte afsluiting van de tracheostoma aanvullend en maakt de optimale vingerplaatsing goed voelbaar. Met een lichte vingerdruk op het HME-deksel kan de patiënt een zeer nauwkeurige afsluiting van de tracheostoma, bijv. voor spraak, bereiken. De bedienbaarheid is zelfs door kleding heen gewaarborgd.

FILTERS VOOR UW BEHOEFTE

De LARYVOX® MY EXTRA HME kan afhankelijk van individuele activiteiten en vereisten in vier verschillende varianten worden gekozen:

- Normal** ▶ normale ademhalingsweerstand tijdens normale fysieke inspanning
- Medium** ▶ gemiddelde ademhalingsweerstand tijdens fysieke activiteiten
- HighFlow** ▶ verminderde ademhalingsweerstand tijdens zware fysieke belasting
- Sport** ▶ zeer geringe ademhalingsweerstand speciaal voor sportactiviteiten



SAMENSTELLING

EENVOUDIG GEBRUIK

Zijdelingse ademopeningen zorgen voor een vrijwel onbelemmerde luchtstroom, zelfs wanneer zij bedekt zijn met kleding of extra bescherming voor tracheostoma's en zorgen zo voor een gemakkelijke ademhaling. De HME-filtercassette kan met een 22 mm-adapter (KOMBI) op alle conventionele basisplaten (bijv. LARYVOX® Tape) of siliconencanules voor personen met een laryngectomie (bijv. LARYNGOTEC®) worden bevestigd. Middels een lipje op de behuizing kan de LARYVOX® MY EXTRA MY EXTRA HME-filtercassette eenvoudig worden gehanteerd en snel uit de houder worden verwijderd, hetgeen het ophoesten en de verzorging van de tracheostoma vergemakkelijkt.

GEEN ONAANGENAME BIJGELUIDEN

Het deksel en de behuizing van de HME zijn door een speciaal sluitmechanisme optimaal op elkaar afgestemd. Op deze wijze wordt de HME bijzonder goed afgesloten en ongewenst luchtverlies langs de HME vermeden. Onaangename bijgeluiden worden gereduceerd.

UW EIGEN ONTWERP

U kunt nu uw eigen persoonlijke MY EXTRA HME samenstellen. Hiervoor selecteert u eerst uw filter: Normal, Medium, High-Flow of Sport. Vervolgens kunt u de kleur van de behuizing en de spreekknop (deksel) bepalen en deze qua kleur combineren.

Hiervoor kunt u kiezen uit 23 verschillende kleuren en meer dan 500 verschillende kleurencombinaties. De kleuren van het deksel en de behuizing kunnen naar wens worden gecombineerd. Zo heeft u de mogelijkheid om dagelijks uw HME te kiezen die bij uw kleding past.

VOELT U ZICH AANGESPROKEN?

Bezoek ons op www.fahl.de en ontdek de kleurvariatie van de LARYVOX® MY EXTRA HME-filter. De voor u verantwoordelijke servicemedewerkers op ons kantoor en in de buitendienst van ons bedrijf helpen u graag bij het creëren van uw eigen HME-filters!
Vraag ons ernaar!

ZO CREËERT U UW PERSOONLIJKE HME

1. Keuze van de LARYVOX® MY EXTRA HME-filter:

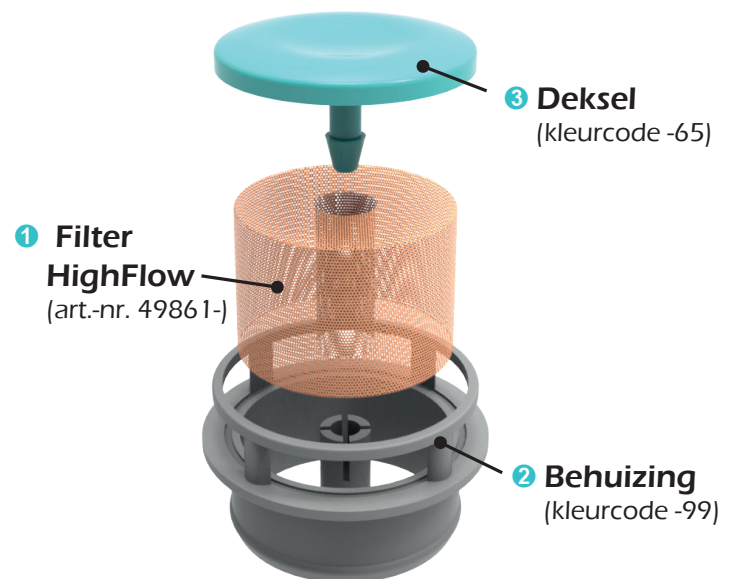
Normal (art.-nr. 49860-)
Medium (art.-nr. 49862-)
HighFlow (art.-nr. 49861-)
Sport (art.-nr. 49863-)

2. Keuze van de kleur van de behuizing: bijv. zilver (kleurcode 99)

3. Keuze kleur deksel/drukstuk: bijv. turquoise (kleurcode 65)

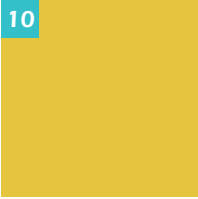
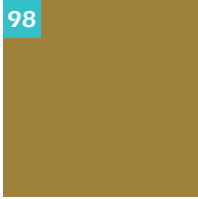
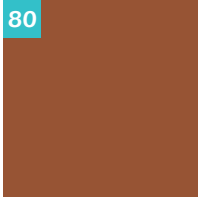
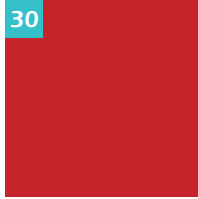
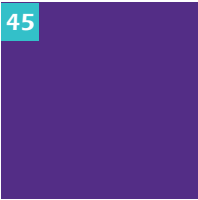
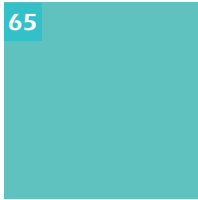
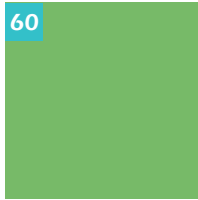
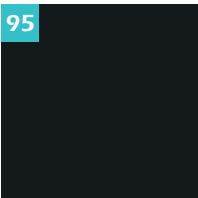
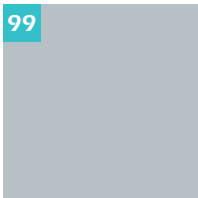
Voorbeeld:

- ❶ Filter: HighFlow art.-nr. **49861-**
- ❷ Kleur behuizing: zilver **-99**
- ❸ Kleur deksel: turquoise **-65**
▶ **art.-nr. 49861-9965**

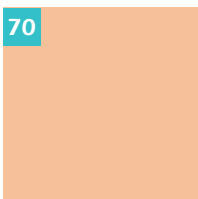
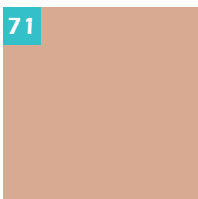
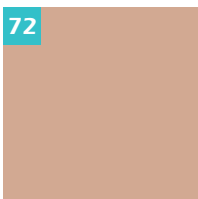
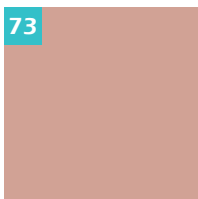
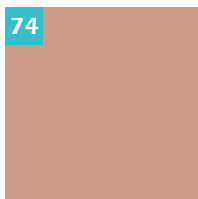
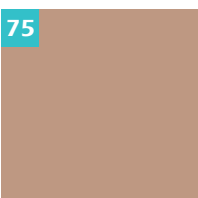
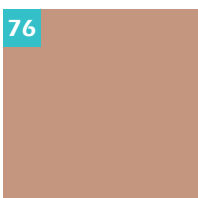
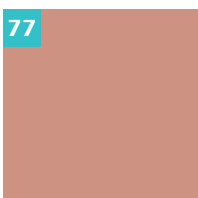
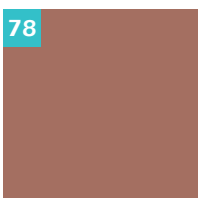
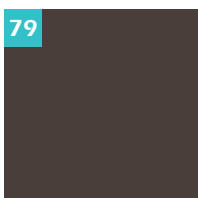


LARYVOX® MY EXTRA HME
art.-nr. 49861-9965

KLEURSCHAKERINGEN

				
Geel	Goud	Bruin	Oranje	Rood
				
Paars	Donkerblauw	Blauw	Turquoise	Groen
				
Zwart	Zilver	Wit		

NATUURLIJKE TINTEN

				
Classic	Vanille	Zacht beige	Natuurbeige	Goudbeige
				
Zand	Creme	Honing	Caramel	Donkerbruin



Classic/Geel



Classic/Goud



Classic/Bruin



Classic/Oranje



Classic/Rood



Classic/Paars



Classic/Blauw



Classic/Turquoise



Classic/Groen



Classic/Zwart



Classic/Zilver



Classic/Wit



Geel/Geel



Geel/Rood



Geel/Donkerblauw



Geel/Groen



Geel/Zwart



Geel/Wit



Goud/Goud



Goud/Zilver



Goud/Wit



Bruin/Bruin



Bruin/Wit



Oranje/Oranje



Oranje/Wit



Rood/Geel



Rood/Rood



Rood/Zwart



Rood/Zilver



Rood/Wit



Paars/Paars



Paars/Zwart



Paars/Zilver



Paars/Wit



Donkerblauw/Geel



Donkerblauw/Donkerblauw



Donkerblauw/Wit



Blauw/Blauw



Blauw/Groen



Blauw/Zwart

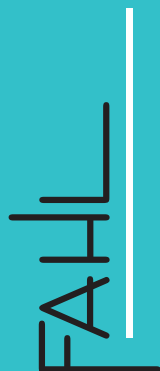
 5599 Blauw/Zilver	 5590 Blauw/Wit	 6565 Turquoise/Turquoise	 6599 Turquoise/Zilver	 6590 Turquoise/Wit
 6010 Groen/Geel	 6060 Groen/Groen	 6090 Groen/Wit	 9510 Zwart /Geel	 9598 Zwart /Goud
 9530 Zwart /Rood	 9545 Zwart /Paars	 9555 Zwart /Blauw	 9565 Zwart /Turquoise	 9560 Zwart /Groen
 9595 Zwart /Zwart	 9599 Zwart /Zilver	 9590 Zwart /Wit	 9910 Zilver/Geel	 9998 Zilver/Goud
 9945 Zilver/Paars	 9955 Zilver/Blauw	 9965 Zilver/Turquoise	 9995 Zilver/Zwart	 9999 Zilver/Zilver
 9990 Zilver/Wit	 9010 Wit/Geel	 9098 Wit/Goud	 9080 Wit/Bruin	 9020 Wit/Oranje
 9030 Wit/Rood	 9045 Wit/Paars	 9050 Wit/Donkerblauw	 9055 Wit/Blauw	 9065 Wit/Turquoise
 9060 Wit/Groen	 9095 Wit/Zwart	 9099 Wit/Zilver	 9090 Wit/Wit	

7070  Classic/Classic	7090  Classic/Wit	7171  Vanille/Vanille	7198  Vanille/Goud	7272  Zacht beige/ Zacht beige
7220  Zacht beige/Oranje	7373  Natuurbeige/ Natuurbeige	7330  Natuurbeige/Rood	7474  Goudbeige/Goudbeige	7445  Goudbeige/Paars
7575  Zand/Zand	7550  Zand/Donkerblauw	7676  Creme/Creme	7655  Creme/Blauw	7777  Honing/Honing
7765  Honing/Turquoise	7878  Caramel/Caramel	7899  Caramel/Zilver	7979  Donkerbruin/ Donkerbruin	7995  Donkerbruin/Zwart

BESTELINFORMATIEEN:

► LARYVOX® MY EXTRA HME	Verpakking met 5 stuks	art.-nr. 49860-xxxx
► LARYVOX® MY EXTRA HME MEDIUM	Verpakking met 5 stuks	art.-nr. 49862-xxxx
► LARYVOX® MY EXTRA HME HIGHFLOW	Verpakking met 5 stuks	art.-nr. 49861-xxxx
► LARYVOX® MY EXTRA HME SPORT	Verpakking met 5 stuks	art.-nr. 49863-xxxx

Geef bij bestelling de kleurcode na het artikelnr. (art.-nr.) aan!



Andreas Fahl
Medizintechnik-Vertrieb GmbH
August-Horch-Str. 4a
51149 Keulen - Duitsland
Phone +49 (0) 22 03/29 80-0
Fax +49 (0) 22 03/29 80-100
mail info@fahl.de
www.fahl.de

Filiaal Berlijn
Am Borsigturm 62
13507 Berlijn - Duitsland
Phone +49 (0) 30/43 73 139-0
Fax +49 (0) 30/43 73 139-35

Filiaal München
Aurbacher Straße 2
81541 München - Duitsland
Phone +49 (0) 89/58 90 90 9-0
Fax +49 (0) 89/58 90 90 9-20

Filiaal Oostenrijk
Triester Straße 14 / Bürohaus 2
2351 Wiener Neudorf - Oostenrijk
Phone +43 (0) 22 36/89 28 38-0
Fax +43 (0) 22 36/89 28 38-14

Filiaal Zwitserland
Cherstrasse 4
8152 Glattbrugg - Zwitserland
Phone +41 (0) 44829360
Fax +41 (0) 48293061