

LARYVOX® PAD CONNECT


Plaque d'étanchéité






CE



CE

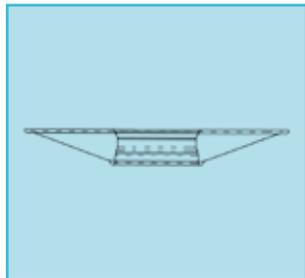

- ▶ Le tampon LARYVOX® PAD CONNECT est une plaque d'étanchéité auto-adhésive en silicone médical, souple et de couleur chair, avec un connecteur intégré de 22 mm (KOMBI)
- ▶ Particulièrement doux pour la peau en raison du matériau utilisé, la peau autour du trachéostome est moins irritée
- ▶ Sert à la compensation des différences de hauteur de peau d'un trachéostome irrégulier et profond
- ▶ Grâce au connecteur intégré de 22 mm (KOMBI) un filtre HME/nez artificiel approprié peut être inséré directement dans le PAD sans aucun problème et sans plaque de base
- ▶ De par les propriétés de son matériau et sa forme ergonomique, le tampon LARYVOX® PAD CONNECT s'adapte à la peau entourant le trachéostome
- ▶ La forme plano-convexe du LARYVOX® PAD CONNECT assure un sceau de haute qualité, qui facilite la formation de la voix
- ▶ Outre la réduction de l'expulsion de sécrétions, cela permet aussi une minimisation du passage latéral de l'air respiré
- ▶ Un adhésif pour la fixation n'est pas nécessaire, mais si une force adhésive accrue est requise (par exemple à une pression de soufflage élevée), la FAHL® Silicone Glue (Réf 29810) peut être utilisée en complément

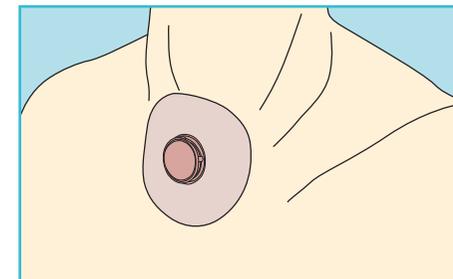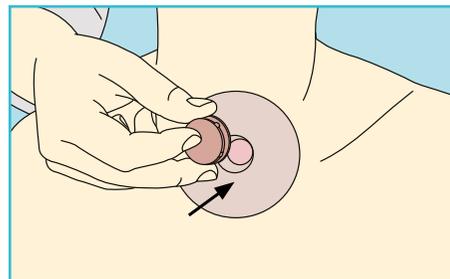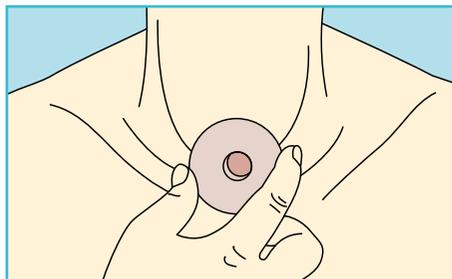

Les informations de commande :

LARYVOX® PAD CONNECT

Boîte de 2 unités

Réf. 48710