

SUCTION CATHETER IDEAL TIP

REF 019055x1 / REF 019068x1



REF 60700 (en option)



- ▶ Sonde stomatale atraumatique stérile pour l'aspiration en douceur de la sécrétion trachéale
- ▶ En plastique souple, flexible et transparent avec une pointe arrondie
- ▶ Avec orifice central et deux orifices latéraux à l'extrémité du cathéter pour prévenir l'effet ventouse du cathéter exercé sur la paroi trachéale au cours de la procédure d'aspiration
- ▶ Dureté Shore A74
- ▶ Deux variantes de longueur : 25 cm et 50 cm
- ▶ Large assortiment (CH 06-18)
- ▶ Connecteurs à codage couleur
- ▶ À utiliser avec le cône TRACHFLOW® Fingertip pour contrôler la puissance d'aspiration. La tubulure d'aspiration de l'aspirateur est reliée à la sonde stomique stérile au moyen du cône TRACHFLOW® Fingertip. De par sa construction conique, une taille du cône presse-doigt TRACHFLOW® convient à toutes les tailles de sonde stomique
- ▶ Sans DEHP ni latex

CONTENU

**SUCTION CATHETER
IDEAL TIP, 50 CM** REF 019055X1

150 x Sonde stomatale stérile

ou

**SUCTION CATHETER
IDEAL TIP, 25 CM** REF 019068X1


100 x Sonde stomatale stérile

Prière d'indiquer la taille après le numéro de référence pour toute commande!

Disponible en option :

TRACHFLOW® FINGERTIP REF 60700
(non stérile)

INFORMATION

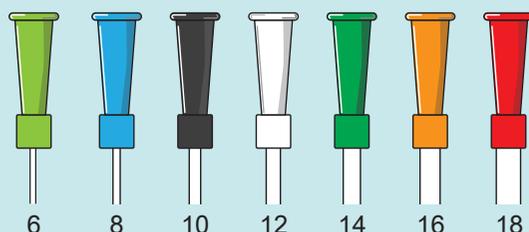

CE 0044 STERILE EO (non valable pour REF 60700)

Les articles	Taille	Longueur	Shore	Unité	REF
SUCTION CATHETER IDEAL TIP, 50 CM	CH 06	50 cm	A74	150	01905511
SUCTION CATHETER IDEAL TIP, 50 CM	CH 08	50 cm	A74	150	01905521
SUCTION CATHETER IDEAL TIP, 50 CM	CH 10	50 cm	A74	150	01905531
SUCTION CATHETER IDEAL TIP, 50 CM	CH 12	50 cm	A74	150	01905541
SUCTION CATHETER IDEAL TIP, 50 CM	CH 14	50 cm	A74	150	01905551
SUCTION CATHETER IDEAL TIP, 50 CM	CH 16	50 cm	A74	150	01905561
SUCTION CATHETER IDEAL TIP, 50 CM	CH 18	50 cm	A74	150	01905571
SUCTION CATHETER IDEAL TIP, 25 CM	CH 06	25 cm	A74	100	01906811
SUCTION CATHETER IDEAL TIP, 25 CM	CH 08	25 cm	A74	100	01906821
SUCTION CATHETER IDEAL TIP, 25 CM	CH 10	25 cm	A74	100	01906831
SUCTION CATHETER IDEAL TIP, 25 CM	CH 12	25 cm	A74	100	01906841
SUCTION CATHETER IDEAL TIP, 25 CM	CH 14	25 cm	A74	100	01906851
SUCTION CATHETER IDEAL TIP, 25 CM	CH 16	25 cm	A74	100	01906861
SUCTION CATHETER IDEAL TIP, 25 CM	CH 18	25 cm	A74	100	01906871