

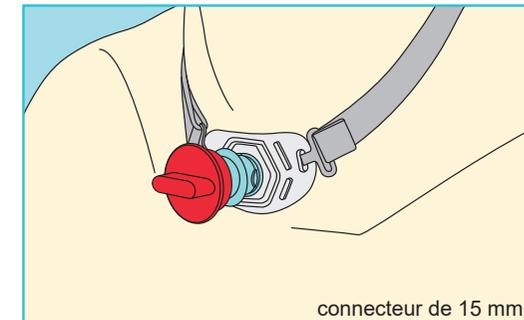


# FAHL® MULTI PLUG

## Obturateur de désaccoutumance

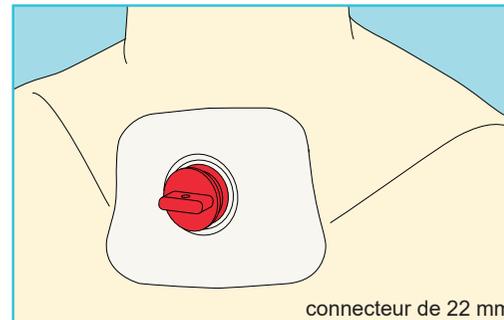

- ▶ L'obturateur FAHL® MULTI PLUG sert à l'obturation d'une canule trachéale/ plaque de base et permet une désaccoutumance sûre
- ▶ Suite à une trachéotomie, une réaccoutumance progressive à la respiration au moyen des voies respiratoires physiologiques est requise à travers l'obturateur de trachéostome temporaire
- ▶ L'inspiration et l'expiration du patient a lieu au cours de l'utilisation exclusivement à travers la région nasopharyngée
- ▶ Un retrait de canule peut être réalisé une fois disparue la cause primaire de la pose d'un trachéostome, par ex. en présence d'un patient trachéotomisé affichant un larynx partiellement ou entièrement conservé
- ▶ L'obturateur FAHL® MULTI PLUG présente une barre facilitant la manipulation lors de l'insertion / du retrait
- ▶ Un orifice intégré à la barre permet la fixation d'une bande de prévention de toute perte, notamment lors d'une quinte de toux
- ▶ L'obturateur FAHL® MULTI PLUG est compatible avec tous les supports courants de 22 mm- LARYVOX® Tape par exemple et courants de 15 mm SPIRAFLEX® UNI par exemple
- ▶ L'obturateur FAHL® MULTI PLUG ne peut pas être utilisé en association avec TRACHEOTEC®, TRACHEOTEC® PRO / SILC et TRACHEOSILC®

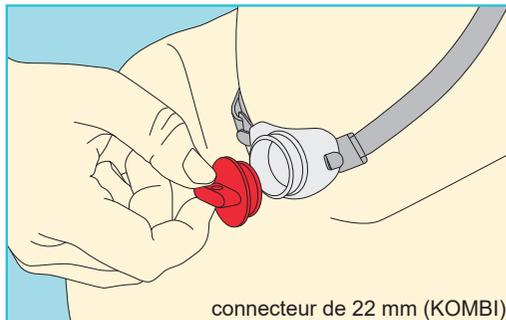

### Les informations de commande:

FAHL® MULTI PLUG

Réf. 49812