

**INDICATIONS DE COMMANDE:**

▶ **KATZ EXTRACTOR® OTO-RHINO FOREIGN BODY REMOVER**  
Boîte de 5 unités

**REF FB5000**

**FAHL**

**KATZ EXTRACTOR®**

**OTO-RHINO FOREIGN BODY REMOVER**



**EXTRACTION DE CORPS**

**ÉTRANGER RAPIDE ET AISÉE**

**FAHL**

**Andreas Fahl**  
**Medizintechnik-Vertrieb GmbH**  
August-Horch-Str. 4a  
51149 Cologne - Allemagne  
Phone +49 (0) 22 03/29 80-0  
Fax +49 (0) 22 03/29 80-100  
mail [info@fahl.de](mailto:info@fahl.de)  
[www.fahl.de](http://www.fahl.de)

**Succursale Berlin**  
Am Borsigturm 62  
13507 Berlin - Allemagne  
Phone +49 (0) 30/43 73 139-0  
Fax +49 (0) 30/43 73 139-35

**Succursale Munich**  
Aurbacher Straße 2  
81541 Munich - Allemagne  
Phone +49 (0) 89/58 90 90 9-0  
Fax +49 (0) 89/58 90 90 9-20

**Filiale Autriche**  
Triester Straße 14 / office building 2  
2351 Wiener Neudorf - Autriche  
Phone +43 (0) 22 36/89 28 38-0  
Fax +43 (0) 22 36/89 28 38-14


**Filiale Suisse**  
Cherstrasse 4  
8152 Glattbrugg - Suisse  
Phone +41 (0) 448293060  
Fax +41 (0) 448293061

REF 90114FR - FB 2535/01 DOK EL Katz Extractor® Oto-Rhino Foreign Body Remover FR 06/2019

\*Katz Extractor® est une marque déposée de Freudenberg Medical, LLC

## KATZ EXTRACTOR® OTO-RHINO FOREIGN BODY REMOVER

Un corps étranger dans le conduit nasal ou le conduit auditif externe exige une extraction conforme. Le corps étranger impacté expose à un risque de lésion et de gonflement des muqueuses. L'extracteur KATZ EXTRACTOR® OTO-RHINO FOREIGN BODY REMOVER permet une extraction simple, rapide et conforme afin de prévenir le plus rapidement possible de graves lésions du conduit auditif ou nasal.

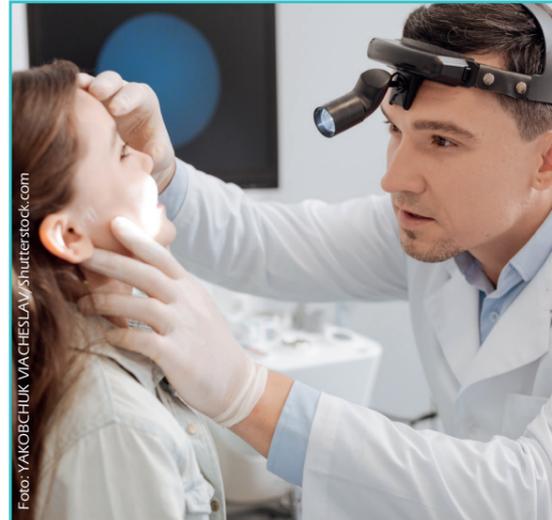


### KATZ EXTRACTOR® OTO-RHINO FOREIGN BODY REMOVER

En coopération avec le Dr David L. Katz, le dispositif KATZ EXTRACTOR® OTO-RHINO FOREIGN BODY REMOVER a été spécifiquement conçu pour l'extraction de corps étrangers impactés dans des conduits nasaux et des conduits auditifs externes. L'instrument facile à utiliser est prêt à l'emploi et conditionné de manière pratique dans une boîte distributrice de 5 unités. Les pinces ou les cathéters de Foley affolent souvent les patients, souvent en bas âge. Il est inutile d'avoir recours à un auxiliaire supplémentaire onéreux avec l'extracteur oto-rhinologique de corps étranger. L'utilisation d'un dispositif d'aspiration n'est pas non plus requise.

### AGRÉABLE SOUPLESSE ET FLEXIBILITÉ

De par son matériau mobile et flexible, le cathéter du KATZ EXTRACTOR® OTO-RHINO FOREIGN BODY REMOVER peut être inséré de manière aisée et être glissé le long du corps étranger. Le ballonnet gonflé d'air et entièrement déplié s'adapte aux structures anatomiques du nez et de l'oreille de par les propriétés du matériau qui le compose, et ce sans provoquer de douleurs chez le patient traité.

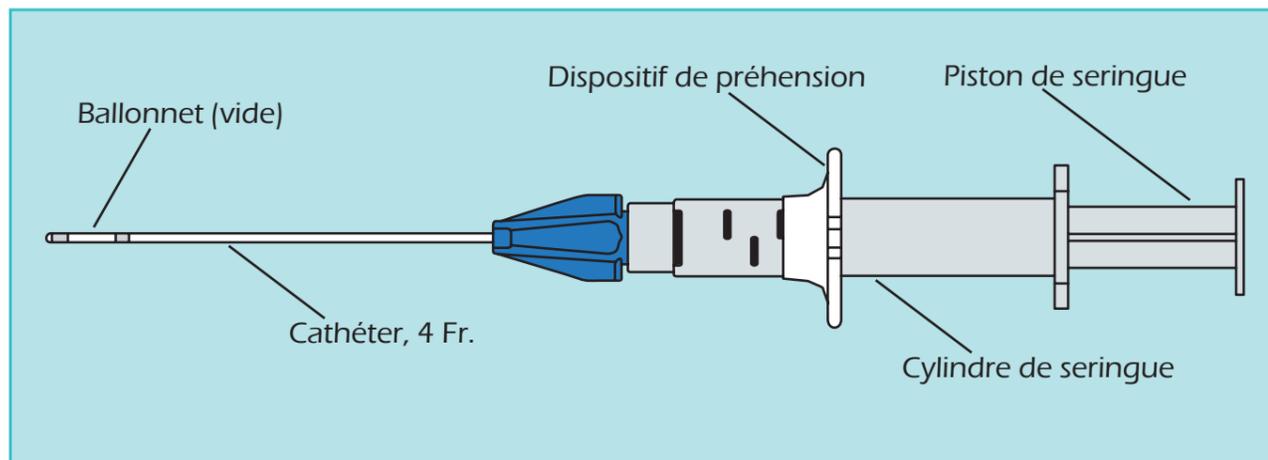


## KATZ EXTRACTOR® OTO-RHINO FOREIGN BODY REMOVER

### EXTRACTION DE CORPS ÉTRANGER EN SEULEMENT 2 MINUTES


Des corps étrangers peuvent être extraits de l'oreille ou du nez de manière atraumatique en trois étapes simples.

#### ÉTAPE 1 : INSERTION

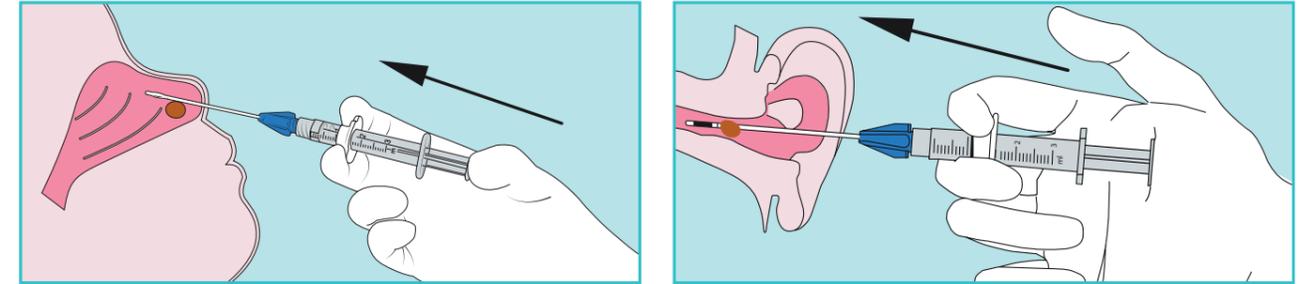


L'insertion du cathéter flexible se fait au moyen du ballonnet vide à l'extrémité distale. Le cathéter est alors positionné derrière le corps étranger impacté. Le dispositif de préhension de forme ergonomique assure la stabilité.

#### ÉTAPE 2 : INSUFFLATION

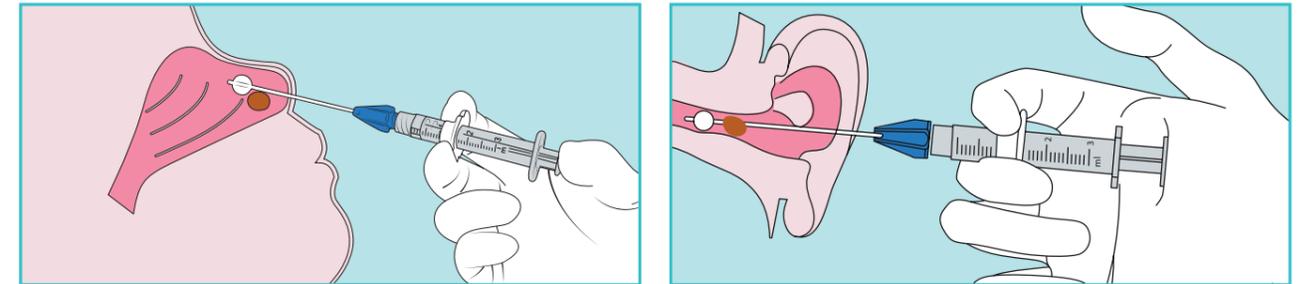

L'avancée du piston de la seringue entraîne le déploiement complet du ballonnet à l'extrémité du cathéter.

#### ÉTAPE 3 : EXTRACTION

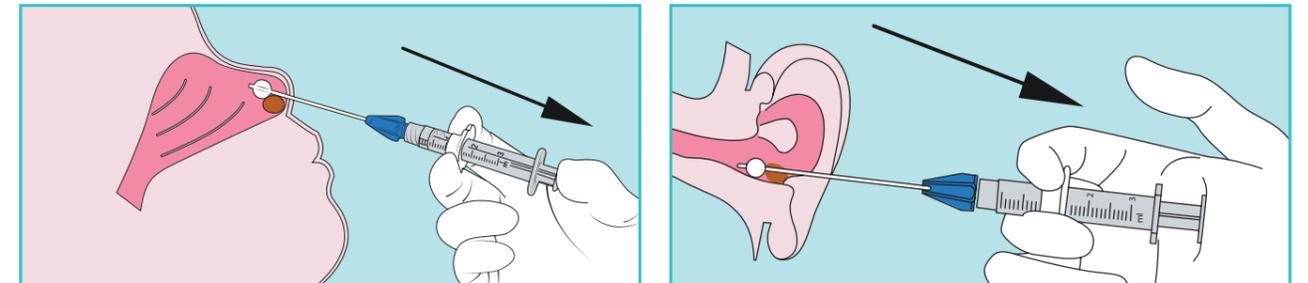

Le retrait prudent du cathéter associé au ballonnet qui reste gonflé permet maintenant d'extraire le corps étranger.

