


- ▶ Trachealkanüle mit zwei Innenkanülen (IC), Niederdruckmanschette/Cuff und integriertem Absaugschlauch (SUCTION), um Sekret oberhalb des Cuffs zu entfernen
- ▶ Absaugschlauch ist in die Innenwand des Kanülenrohrs integriert, um zusätzliche Irritationen der Trachea oder des Tracheostomas zu vermeiden
- ▶ Weiches, flexibles Kanülenschild mit Aufdruck der wesentlichen Spezifikationen der Kanüle
- ▶ Mit 15 mm Drehkonnektor (VARIO), um Zug- und Drehkräfte abzupuffern, wie sie durch den Beatmungsschlauch entstehen können
- ▶ Mit Röntgenkontraststreifen
- ▶ Set beinhaltet ein Kanülentrageband, einen Obturator und einen Kanülenpass
- ▶ Innenkanülen auch separat bestellbar (REF 18933), Größe muss entsprechend der TRACHEOTEC® PRO Außenkanüle gewählt werden



Bestellhinweis:

TRACHEOTEC® PRO VARIO CUFF- SUCTION 2 IC, Größe 6-10

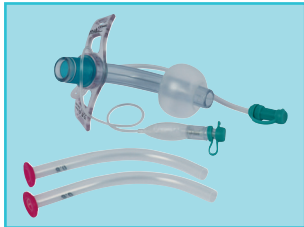

REF 18932

TRACHEOTEC® PRO IC, Größe 6-10, Packung mit 3 Stück



REF 18933

Bei Bestellung bitte Größe hinter Artikelnummer angeben!

STERILE EO Sterilisation mit Ethylenoxid

Nicht erneut sterilisieren

Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren

Einpatientenprodukt

Gebrauchsanweisung beachten

Rx only
ACHTUNG:
 Amerikanisches Bundesrecht sieht vor, dass Verkauf, Abgabe und die Anwendung dieses Hilfsmittels nur durch oder auf Anweisung eines Arztes oder geschultem Fachpersonal erfolgen dürfen (in den USA).

CE 0482 CE-Kennzeichnung mit Kennnummer der Benannten Stelle

Größe	A.D. Schild mm	A.D. Spitze mm	I.D. mm	Länge mm (mittl. Radius)	Länge mm	REF
6	8,7	8,7	6,0	60,7	67,1	18932-06
7	10,0	10,0	7,0	69,6	77,0	18932-07
8	11,3	11,3	8,0	79,5	87,9	18932-08
9	12,7	12,7	9,0	85,5	94,9	18932-09
10	14,0	14,0	10,0	95,0	105,3	18932-10

A.D. Schild = Außendurchmesser hinter dem Kanülenschild · A.D. Spitze = Außendurchmesser der Außenkanüle an der Kanülenspitze · I.D. = Innendurchmesser an der Spitze der Innenkanüle · A-Kanüle = Außenkanüle · I-Kanüle = Innenkanüle · Länge = Länge über Außenbogen · Länge mittlerer Radius = Länge der Mittellinie von Flansch bis Spitze