

INDICATIONS DE COMMANDE:

▶ OVAL

BLOM SINGER® NASAL SEPTAL OVAL	11 x 13 mm, 2 mm d'épaisseur	REF SP2112
BLOM SINGER® NASAL SEPTAL OVAL	11 x 13 mm, 3 mm d'épaisseur	REF SP2113
BLOM SINGER® NASAL SEPTAL OVAL	13 x 17 mm, 2 mm d'épaisseur	REF SP2132
BLOM SINGER® NASAL SEPTAL OVAL	13 x 17 mm, 3 mm d'épaisseur	REF SP2133
BLOM SINGER® NASAL SEPTAL OVAL	15 x 21 mm, 2 mm d'épaisseur	REF SP2152
BLOM SINGER® NASAL SEPTAL OVAL	15 x 21 mm, 3 mm d'épaisseur	REF SP2153

▶ ROUND

BLOM SINGER® NASAL SEPTAL ROUND	Ø 5 mm, 2 mm d'épaisseur	REF SP1052
BLOM SINGER® NASAL SEPTAL ROUND	Ø 5 mm, 3 mm d'épaisseur	REF SP1053
BLOM SINGER® NASAL SEPTAL ROUND	Ø 7 mm, 2 mm d'épaisseur	REF SP1072
BLOM SINGER® NASAL SEPTAL ROUND	Ø 7 mm, 3 mm d'épaisseur	REF SP1073
BLOM SINGER® NASAL SEPTAL ROUND	Ø 10 mm, 2 mm d'épaisseur	REF SP1102
BLOM SINGER® NASAL SEPTAL ROUND	Ø 10 mm, 3 mm d'épaisseur	REF SP1103

FAHL

BLOM-SINGER®

NASAL SEPTAL PERFORATION PROSTHESIS



PROTHÈSE DE SEPTUM NASAL MAGNÉTIQUE

POUR UN AJUSTEMENT INDIVIDUEL

FAHL
Andreas Fahl
Medizintechnik-Vertrieb GmbH
August-Horch-Str. 4a
51149 Cologne - Allemagne
Phone +49 (0) 22 03/29 80-0
Fax +49 (0) 22 03/29 80-100
mail info@fahl.de
www.fahl.de

Succursale Berlin
Am Borsigturm 62
13507 Berlin - Allemagne
Phone +49 (0) 30/43 73 139-0
Fax +49 (0) 30/43 73 139-35


Succursale Munich
Aurbacher Straße 2
81541 Munich - Allemagne
Phone +49 (0) 89/58 90 90 9-0
Fax +49 (0) 89/58 90 90 9-20

Filiale Autriche
Triester Straße 14 / office building 2
2351 Wiener Neudorf - Autriche
Phone +43 (0) 22 36/89 28 38-0
Fax +43 (0) 22 36/89 28 38-14

Filiale Suisse
Cherstrasse 4
8152 Glattbrugg - Suisse
Phone +41 (0) 448293060
Fax +41 (0) 448293061

BLOM-SINGER® NASAL SEPTAL PERFORATION PROSTHESIS

Un défaut de la cloison nasale (perforation du septum) peut avoir différentes causes. Bien que certains patients soient exempts de symptômes malgré une perforation septale, cette lésion provoque notamment chez les personnes affectées des saignements nasaux répétés, des sifflements lors de la respiration par le nez ainsi qu'une sécheresse nasale associée à la formation de croûtes et de dépôts. La prothèse Blom-Singer® NASAL SEPTAL PERFORATION PROSTHESIS a été développée pour améliorer la qualité de vie de ces patients.

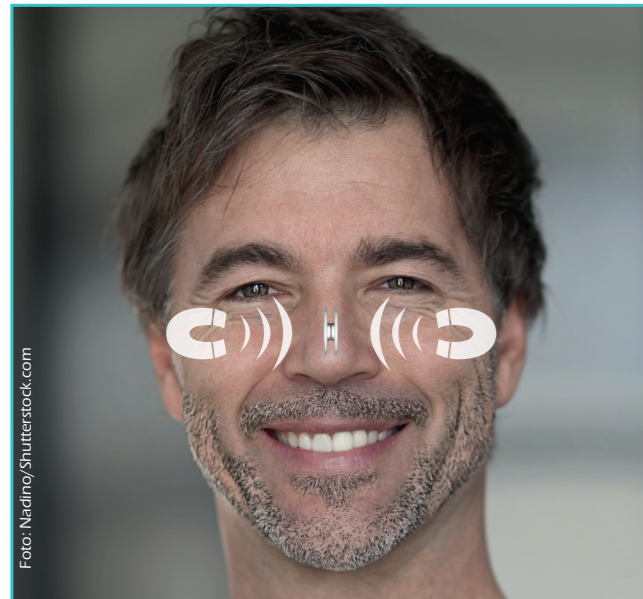

Blom-Singer® NASAL SEPTAL PERFORATION PROSTHESIS

La prothèse de septum nasal magnétique se compose de 2 composants avec bride double. Les aimants de néodyme offrent un maintien fiable et sont recouverts en toute sécurité grâce à un silicone de qualité médicale précisément formé. Les deux brides affichant la même forme et le même diamètre, la mobilité de la prothèse est minimisée et un ajustement optimal à la perforation du septum nasal est ainsi obtenu. La prothèse Blom-Singer® NASAL SEPTAL PERFORATION PROSTHESIS assure un agréable confort de port tout en diminuant le dépôt de résidus de sécrétions et les saignements.

POSITIONNEMENT AISÉ

Des études ont démontré que les patients qui utilisent une prothèse pour septum nasal magnétique bicomposant ne ressentent aucun inconfort lors de l'utilisation, du changement ou du retrait du produit. Par ailleurs, les sujets font état d'un positionnement précis et ajusté de la prothèse.¹ Un instrument non magnétique est nécessaire à l'insertion de la prothèse très souple, il peut s'agir d'une pincette ou d'une pince hémostatique. La prothèse Blom-Singer® NASAL SEPTAL PERFORATION PROSTHESIS est indiquée pour l'obturation non chirurgicale de perforations du septum nasal dans un environnement clinique ou au cabinet médical. Un ajustement de l'épithèse souvent complexe et onéreux peut ainsi être évité tout autant que les effets indésirables liés à l'intervention chirurgicale.

AJUSTEMENT AGRÉABLE

Le positionnement confortable de la prothèse prévient une désagréable sensation de corps étranger chez le patient. En cas de changements de taille ou de forme du défaut septal au cours du temps, un changement de taille de la prothèse Blom-Singer® NASAL SEPTAL PERFORATION PROSTHESIS est le cas échéant nécessaire et possible sans problème.


NETTOYAGE AISÉ

Le nettoyage professionnel de la prothèse de septum nasal est possible aussi bien in situ qu'en dehors de l'organisme. La prothèse prélevée est nettoyée à l'eau et au savon doux après un contrôle médical. Une prothèse Blom-Singer® NASAL SEPTAL PERFORATION PROSTHESIS in situ peut être nettoyée de manière professionnelle à l'aide d'un coton-tige imbibé d'une solution saline à 0,9 % autour de la bride et à proximité de cette dernière.

BLOM-SINGER® NASAL SEPTAL PERFORATION PROSTHESIS

AJUSTEMENT INDIVIDUEL

Afin de pouvoir ajuster la prothèse de manière optimale et individuelle tout en assurant son positionnement aisé, la prothèse Blom-Singer® NASAL SEPTAL PERFORATION PROSTHESIS est fournie en plusieurs formes rondes et ovales, tailles et épaisseurs. L'ajustement idéal minimise la mobilité de la prothèse et prévient ainsi les saignements et l'apparition de croûtes dans la zone du défaut. Il est par ailleurs aussi possible de découper la bride pour l'adapter.

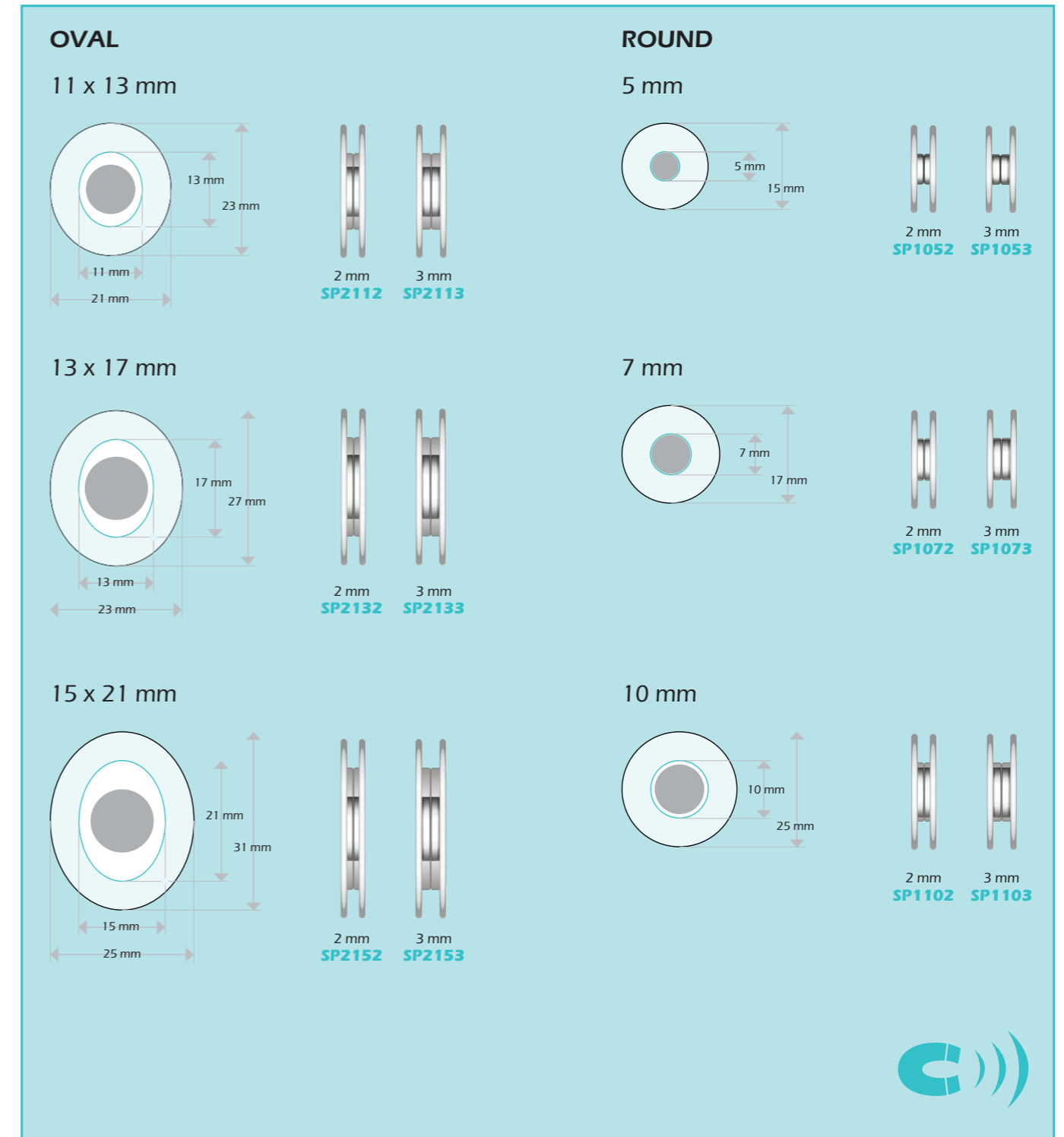

Illustrations à taille réelle

¹ Teschner M, et al. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2012 Mars; 269 (3): 861-5