
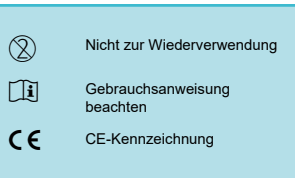


- ▶ Trachealkompressen hoher Qualität, mit anatomisch angepasster Abrundung für optimalen Tragekomfort und Lochstanzung für Trachealkanülen
- ▶ Die Größe ist speziell den anatomischen Gegebenheiten von Neugeborenen und von Kleinkindern angepaßt
- ▶ Die **UNO** Varianten sind einschichtig, für Patienten mit geringer Sekretion
- ▶ Die **DUO** Varianten haben zwei Schichten, für Patienten mit höherer Sekretproduktion. Die direkt auf der Haut anliegende Schicht – durch einen grünen Streifen gekennzeichnet – absorbiert das Sekret effizient und leitet es nach außen in die periphere Schicht ab. Dadurch bleibt die Haut trocken und warm.
- ▶ Standardvarianten ohne Schlitz
- ▶ **SLIT** Varianten mit Schlitz zum schnellen Kompressen-Wechsel bei liegender Kanüle
- ▶ **ALU** Varianten mit Aluminiumbeschichtung zur Verringerung des Verklebens der Komresse mit der Haut um das Tracheostoma

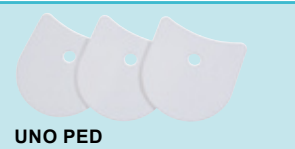

Bestellhinweis:

| | |
|---|------------------|
| SENSOTRACH® UNO PED , 6 x 7 cm, Packung mit 10 Stück | REF 30522 |
| SENSOTRACH® UNO PED SLIT , 6 x 7 cm, Packung mit 10 Stück | REF 30523 |
| SENSOTRACH® UNO PED SLIT Junior , 6 x 7 cm, Packung mit 10 Stück | REF 30525 |
| SENSOTRACH® UNO PED ALU SLIT , 6 x 7 cm, Packung mit 10 Stück | REF 30524 |
| SENSOTRACH® DUO PED , 6 x 7 cm, Packung mit 10 Stück | REF 30622 |
| SENSOTRACH® DUO PED SLIT , 6 x 7 cm, Packung mit 10 Stück | REF 30623 |