
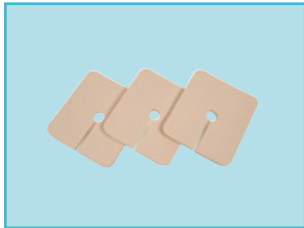


SENSOFOAM® / SENSOFOAM® PAD

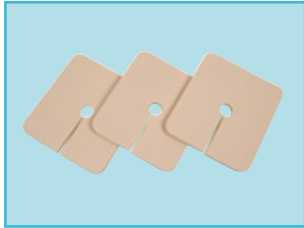

- ▶ Hochwertige Kompresse für Kanülenträger. Sie zeichnet sich durch eine hohe Saugfähigkeit aus.
- ▶ Die SENSOFOAM®-Kompresse ist mehrschichtig aufgebaut, wobei die hautfarbene atmungsaktive Oberschicht ein Durchweichen der Kompresse verhindert. Der absorbierende Schaumstoff saugt die Sekrete schnell und sicher auf.
- ▶ Ein Anhaften/Verkleben mit der Haut wird vermieden. Dadurch lässt sich die Kompresse auch leicht wieder entfernen.
- ▶ Das schwammartige Material ist besonders weich und bietet einen angenehmen Tragekomfort.
- ▶ Inklusive Schlitz, der einen schnellen Kompressenwechsel ermöglicht.
- ▶ Die SENSOFOAM®-Kompresse polstert die Trachealkanüle weich und sicher gegen die Haut ab und verhindert Druckstellen. Gleichzeitig wird hierdurch der Sitz der Trachealkanüle im Tracheostoma stabilisiert.
- ▶ Zwei Varianten: large (groß) und small (klein)
- ▶ SENSOFOAM® PAD ist angelehnt an die anatomische Formgebung des Kanülenschildes.
- ▶ Steril - um einen post-operativen Einsatz zu ermöglichen

	Steril
	Nicht zur Wiederverwendung
	Gebrauchsanweisung beachten
	CE-Kennzeichnung

Bestellhinweis:

SENSOFOAM® - steril, 10 x 9 x 0,5 cm, Packung mit 10 Stück

REF 30860

SENSOFOAM® - steril, small, 6,5 x 6,5 x 0,5 cm, Packung mit 10 Stück

REF 30861

SENSOFOAM® PAD - steril, 7,8 x 3,8 cm, Packung mit 10 Stück

REF 30862