

## BESTELLHINWEISE:

▶ <b>OVAL</b>			
BLOM SINGER® NASAL SEPTAL OVAL	11 x 13 mm, 2 mm dicke	Art.-Nr. SP2112	
BLOM SINGER® NASAL SEPTAL OVAL	11 x 13 mm, 3 mm dicke	Art.-Nr. SP2113	
BLOM SINGER® NASAL SEPTAL OVAL	13 x 17 mm, 2 mm dicke	Art.-Nr. SP2132	
BLOM SINGER® NASAL SEPTAL OVAL	13 x 17 mm, 3 mm dicke	Art.-Nr. SP2133	
BLOM SINGER® NASAL SEPTAL OVAL	15 x 21 mm, 2 mm dicke	Art.-Nr. SP2152	
BLOM SINGER® NASAL SEPTAL OVAL	15 x 21 mm, 3 mm dicke	Art.-Nr. SP2153	
▶ <b>ROUND</b>			
BLOM SINGER® NASAL SEPTAL ROUND	Ø 5 mm , 2 mm dicke	Art.-Nr. SP1052	
BLOM SINGER® NASAL SEPTAL ROUND	Ø 5 mm , 3 mm dicke	Art.-Nr. SP1053	
BLOM SINGER® NASAL SEPTAL ROUND	Ø 7 mm , 2 mm dicke	Art.-Nr. SP1072	
BLOM SINGER® NASAL SEPTAL ROUND	Ø 7 mm , 3 mm dicke	Art.-Nr. SP1073	
BLOM SINGER® NASAL SEPTAL ROUND	Ø 10 mm , 2 mm dicke	Art.-Nr. SP1102	
BLOM SINGER® NASAL SEPTAL ROUND	Ø 10 mm , 3 mm dicke	Art.-Nr. SP1103	

FAHL

BLOM-SINGER®

NASAL SEPTAL PERFORATION PROSTHESIS



MAGNETISCHE NASENSEPTUM-PROTHESE

ZUR INDIVIDUELLEN ANPASSUNG

FAHL

**Andreas Fahl**  
**Medizintechnik-Vertrieb GmbH**  
August-Horch-Str. 4a  
51149 Köln - Germany  
Phone +49 (0) 22 03/29 80-0  
Fax +49 (0) 22 03/29 80-100  
mail info@fahl.de  
www.fahl.de

**Zweigstelle Berlin**  
Am Borsigturm 62  
13507 Berlin - Germany  
Phone +49 (0) 30/43 73 139-0  
Fax +49 (0) 30/43 73 139-35


**Zweigstelle München**  
Aurbacher Straße 2  
81541 München - Germany  
Phone +49 (0) 89/58 90 90 9-0  
Fax +49 (0) 89/58 90 90 9-20

**Zweigniederlassung Österreich**  
Triester Straße 14 / Bürohaus 2  
2351 Wiener Neudorf - Austria  
Phone +43 (0) 22 36/89 28 38-0  
Fax +43 (0) 22 36/89 28 38-14

**Zweigniederlassung Schweiz**  
Cherstrasse 4  
8152 Glattbrugg - Schweiz  
Phone +41 (0) 448293060  
Fax +41 (0) 448293061

## BLOM-SINGER® NASAL SEPTAL PERFORATION PROSTHESIS

Ein Defekt in der Nasenscheidewand (Septumperforation) kann verschiedene Ursachen haben. Obwohl einige Patienten trotz einer Septumperforation symptomfrei sind, verursacht diese bei anderen Betroffenen bspw. häufiges Nasenbluten, Pfeifgeräusche bei der Nasenatmung, sowie eine trockene Nase mit der Bildung von Krusten und Belägen. Um die Lebensqualität dieser Patienten zu verbessern, wurde die Blom-Singer® NASAL SEPTAL PERFORATION PROSTHESIS entwickelt.

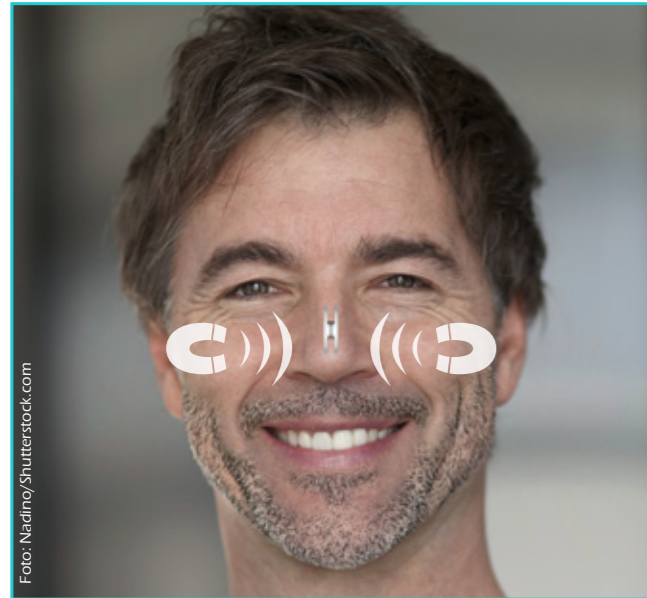

### Blom-Singer® NASAL SEPTAL PERFORATION PROSTHESIS

Die magnetische Nasenseptum-Prothese besteht jeweils aus 2 Komponenten mit Doppelflange. Die Neodym-Magnete bieten starken, zuverlässigen Halt und sind durch exakt geformtes medizinisches Silikon sicher abgedeckt. Da beide Flange die gleiche Form und den gleichen Durchmesser besitzen, wird die Beweglichkeit der Prothese minimiert und eine bestmögliche Anpassung an die Nasenseptumperforation erreicht. Somit sorgt die Blom-Singer® NASAL SEPTAL PERFORATION PROSTHESIS für einen angenehmen Tragekomfort und verringert die Ansammlung von Sekret-Rückständen und Blutungen.

### EINFACHE PLATZIERUNG

Studien haben bewiesen, dass Patienten, die eine zweiteilige magnetische Nasenseptum-Prothese nutzen, keine Beschwerden beim Einsatz, dem Wechsel oder der Entfernung des Produktes haben. Zudem berichteten die Probanden von einem präzisen und engen Sitz der Prothese.<sup>1</sup> Für das Einsetzen der sehr weichen Prothese wird ein nicht-magnetisches Instrument, z. B. eine Pinzette oder eine Gefäßklemme benötigt. Indikation für eine Blom-Singer® NASAL SEPTAL PERFORATION PROSTHESIS ist ein nicht-chirurgischer Verschluss von Nasenseptumperforationen im Klinikumfeld oder einer Arztpraxis. Eine oftmals aufwendige und kostspielige Epithesenanpassung kann so vermieden werden, ebenso wie operative Nebenwirkungen.

### ANGENEHME PASSFORM

Der komfortable Sitz der Prothese vermeidet ein unangenehmes Fremdkörpergefühl bei dem Patienten. Bei Größen- oder Formveränderungen des Septumdefekts ist im Laufe der Zeit ein Größenwechsel der Blom-Singer® NASAL SEPTAL PERFORATION PROSTHESIS u. U. nötig und problemlos möglich.


### UNKOMPLIZIERTE REINIGUNG

Die Reinigung der Nasenseptum-Prothese ist sowohl in-situ als auch außerhalb des Körpers fachmännisch möglich. Die entnommene Prothese wird nach ärztlicher Kontrolle mit Wasser und milder Seife gereinigt. Eine in-situ befindliche Blom-Singer® NASAL SEPTAL PERFORATION PROSTHESIS kann mit einem 0,9%-Kochsalzlösung befeuchteten Wattestäbchen um den Flange und neben dem Flange fachmännisch gereinigt werden.

## BLOM-SINGER® NASAL SEPTAL PERFORATION PROSTHESIS

### INDIVIDUELLE ANPASSUNG

Damit die Prothese bestmöglich und individuell angepasst sowie einfach platziert werden kann, bietet die Blom-Singer® NASAL SEPTAL PERFORATION PROSTHESIS mehrere runde sowie ovale Formen, Größen und Stärken. Durch die ideale Passform wird die Beweglichkeit der Prothese minimiert und verhindert so Blutungen und Verkrustungen im Bereich des Defekts. Ferner ist ein individueller Zuschnitt der Flange möglich.

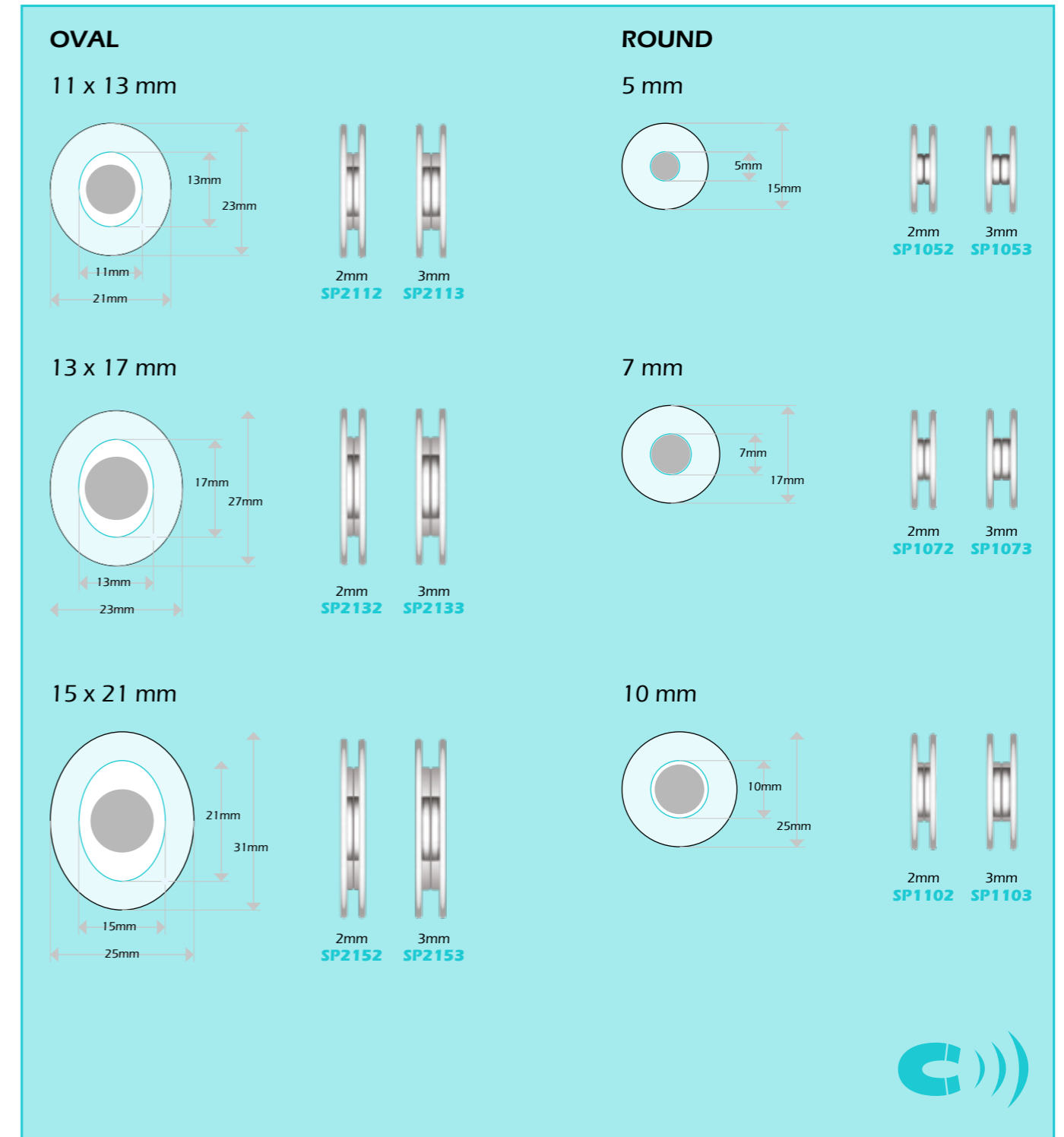

Abbildungen in Originalgröße