

NEBUJUNIOR® INHALATOR FÜR KINDER



NEBUJUNIOR® Bär

Der NEBUJUNIOR® Inhalator ist ein modernes Inhalationsgerät zur druckluftbetriebenen Atemluftbefeuchtung.

Der feine Aerosolnebel ermöglicht eine optimale Anfeuchtung der Atemwege.



NEBUJUNIOR® Pinguin

Die für Kinder ansprechende Optik verringert Abneigungen/Ängste vor der Inhalation.

Zur Pflege und Reinigung ist der NEBUJUNIOR® Inhalator leicht in die einzelnen Bestandteile zerlegbar.



NEBUJUNIOR® Bär mit Mundstück

Der NEBUJUNIOR® wird neben dem kompletten Zubehör (bestehend aus Netzteil, Vernebler, Luftschlauch, Inhaliermaske für Erwachsene, Inhaliermaske für Kinder, Luftfilter, Mundstück und Nasenstück) mit einer passenden Aufbewahrungstasche geliefert.

So ist die Inhalation alternativ durch das Mundstück, das Nasenstück oder die Inhaliermaske möglich.

Als Sonderzubehör erhältlich ist ein spezielles Adapterrohr mit Halsmaske für Patienten mit Tracheostoma.

Bestellhinweis:

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| ▶ NEBUJUNIOR® Bär | Art.-Nr. 50300 |
| ▶ NEBUJUNIOR® Pinguin | Art.-Nr. 50400 |
| ▶ Adapter für Halsmaske | Art.-Nr. 50110 |
| ▶ Halsmaske für Tracheostoma | Art.-Nr. 75200 |

FAHL

Andreas Fahl
Medizintechnik-Vertrieb GmbH
August-Horch-Straße 4a
51149 Köln - Germany
Phone +49 (0) 22 03 / 29 80-0
Fax +49 (0) 22 03 / 29 80-100
email vertrieb@fahl.de
www.fahl.de

FAHL

Hilfsmittel für Kinder




DURATWIX® JUNIOR - TRACHEALKANÜLE FÜR KINDER



DURATWIX® JUNIOR PED

Die DURATWIX® JUNIOR Trachealkanüle wurde speziell für die spezifischen Anforderungen von Neugeborenen und Kleinkindern entwickelt.

Das weiche, ergonomisch geformte Kanülenschild passt sich ausgezeichnet dem Hals an und vermeidet durch eine geringe Druckübertragung Verletzungen an der Trachealwand sowie am Tracheostoma.

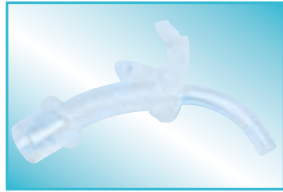

DURATWIX® JUNIOR PED L

Das dünnwandige, thermosensible Material des Kanülenrohrs sorgt für einen angenehmen Tragekomfort. Mit den optimal platzierten Ösen für das Kanülentrageband lässt sich die Kanüle sicher fixieren. Trachealkanülen für die Pädiatrie sind in Ihrem Durchmesser sehr klein und können sehr schnell durch Sekretbildung verstopfen. Aufgrund des transparenten Materials der DURATWIX® JUNIOR Trachealkanüle ist jede Art von Ablagerung im Kanüleninneren schnell zu erkennen.

Die hohe Materialstabilität verringert die Okklusionsgefahr. Der seitlich im Kanülenrohr verlaufende Röntgenkontraststreifen ermöglicht eine exakte röntgenologische Darstellung und Positionskontrolle.

DURATWIX® JUNIOR - Trachealkanüle PED L mit Verlängerung zum Universalansatz

Größe	A.D. Spitze mm	I.D. mm	Länge mm	Länge Universalansatz - Schild	Länge Schild-Kanülenspitze	Art.-Nr.
3	4,5	3	32	36	68	17431-03
3,5	5,3	3,5	32	39	71	17431-035
4	6	4	32	42	74	17431-04
4,5	6,5	4,5	47	45	92	17431-045
5	7	5	47	48	95	17431-05
5,5	7,7	5,5	47	52	99	17431-055
6	8,3	6	47	55	102	17431-06

Hinweise zur Größenbestimmung:

A.D. Spitze = Außendurchmesser der Außenkanüle an der Kanülenspitze • I.D. = Innendurchmesser an der Kanülenspitze • Länge = Länge über Außenbogen

DURATWIX® JUNIOR - TRACHEALKANÜLE FÜR KINDER

DURATWIX® JUNIOR - Trachealkanüle PED

Größe	A.D. Spitze mm	I.D. mm	Cuff mm	Art.-Nr.
3	4,5	3	36	17401-03
3,5	5,3	3,5	39	17401-035
4	6	4	42	17401-04
4,5	6,5	4,5	45	17401-045
5	7	5	48	17401-05
5,5	7,7	5,5	52	17401-055
6	8,3	6	55	17401-06

Bestellhinweis:

DURATWIX® JUNIOR Trachealkanüle, steril mit 15 mm-Standardkonnektor

- ▶ Gr. 3-6 PED **Art.-Nr. 17401**
- ▶ Gr. 3-6 PED L **Art.-Nr. 17431**

Bei Bestellung bitte Größe hinter Artikelnummer angeben!

SUPRAFIX® KANÜLENTRAGEBAND



Für die empfindliche Halspartie des Säuglings oder Kleinkindes eignet sich besonders gut das weich gepolsterte Kanülentrageband aus Schaumstoff mit Klettverschluss. Es ist ohne Befestigungsbänder ca. 12cm lang und kann mittels der elastischen Befestigungsbänder auf eine maximale Halsweite bis zu 27cm eingestellt werden. Das Schaumstoffmaterial ist von einem weichen Vliesstoff überzogen, der Feuchtigkeit optimal aufnimmt und ein Wundscheuern verhindert.

Bestellhinweis:

- ▶ SUPRAFIX® 13K mit Klettverschluss für Kinder, verstellbar von 20-27 cm **Art.-Nr. 32510**
- ▶ SUPRAFIX® 13K mit Haken für Kinder, verstellbar von 17-28 cm **Art.-Nr. 32310**

SENSOFOAM® TRACHEALKOMPRESSE FÜR KINDER



Die SENSOFOAM®-Komresse ist eine hochwertige Komresse für Kanülenträger – speziell für Kinder in einem kleineren Format. Sie zeichnet sich durch eine hohe Saugfähigkeit aus und ist mehrschichtig aufgebaut, wobei die hautfarbene atmungsaktive Oberschicht ein Durchweichen der Komresse verhindert.



Der absorbierende Schaumstoff saugt die Sekrete schnell und sicher auf. Außerdem wird ein Anhaften/Verkleben mit der Haut vermieden. Dadurch lässt sich die Komresse auch leicht wieder entfernen.

Die SENSOFOAM®-Komresse ist reizarm und eignet sich besonders für einen Einsatz bei wundem und empfindlichem Tracheostoma.

Die Komresse polstert die Trachealkanüle weich und sicher gegen die Haut ab und verhindert so Druckstellen.

Gleichzeitig wird hierdurch der Sitz der Trachealkanüle im Trachestoma stabilisiert. Mittig der Komresse befindet sich eine Lochstanzung zum Durchführen einer Trachealkanüle.

Zusätzlich ist ein Schlitz vorhanden, der einen schnellen Kompressenwechsel, ohne Entfernen der Kanüle, ermöglicht.

Bestellhinweis:

- ▶ SENSOFOAM® Trachealkompresse für Kinder, geschlitzt, steril, Größe 6,5 x 6,5 x 0,5 cm, Packung mit 10 Stück **Art.-Nr. 30861**