


# FAHL® TRACHEO-SAFE

- ▶ Tracheostoma-Platzhalter zur Einführung in das Tracheostoma, zur Sicherung der Atemwege und zur gleichzeitigen größtmöglichen Schonung der empfindlichen Trachealschleimhaut durch Minimierung der Kontaktfläche.
- ▶ Aus weichem Silikon hergestellt
- ▶ Besteht aus einem Kanülenrohr, das am unteren Kanülenende in eine längliche, der Trachea angepasste Halbröhre übergeht, die sich der Luftröhre anatomisch anschmiegt
- ▶ Kanülenschild mit zwei seitlichen Öffnungen zum Befestigen eines Kanülentragebandes
- ▶ Verstellbares Kanülenschild, optimiert den Abstand zwischen Halsoberfläche und der Luftröhre
- ▶ Ein abnehmbarer Verschlussstöpsel ist am oberen (distalen) Ende des Platzhalters angebracht. Dieser ermöglicht den Verschluss des Tracheostomas beim Entwöhnen (Weaning/Dekanülierung) des Patienten von der Trachealkanüle z.B. nach Langzeitbeatmung
- ▶ Durch Abnehmen des Verschlussstöpsels ist es möglich, Trachealsekret durch das Kanülenrohr abzusaugen
- ▶ Erhältlich in zwei Längen, 45 und 70 mm

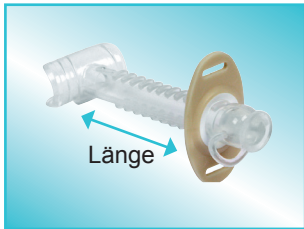

**STERILE EO** Sterilisation mit Ethylenoxid

Nicht erneut sterilisieren

Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren

Einpatientenprodukt

Gebrauchsanweisung beachten

**Rx only** ACHTUNG: Amerikanisches Bundesrecht sieht vor, dass Verkauf, Abgabe und die Anwendung dieses Hilfsmittels nur durch oder auf Anweisung eines Arztes oder geschultem Fachpersonal erfolgen dürfen (in den USA).

**CE 0482** CE-Kennzeichnung mit Kennnummer der Benannten Stelle

Product made in Germany

## Bestellhinweis:

**FAHL® Tracheo-Safe C**, 45 mm lang

**REF 20895**

**FAHL® Tracheo-Safe P**, 70 mm lang

**REF 20898**