


TRACHEOTEC® VARIO CUFF-SUCTION

- ▶ Trachealkanüle mit CUFF und integriertem Absaugschlauch, um Sekret oberhalb des CUFF zu entfernen
- ▶ Absaugschlauch ist in die Innenwand des Kanülenrohrs integriert, um zusätzliche Irritationen der Trachea oder des Tracheostomas zu vermeiden
- ▶ Weiches, flexibles Kanülenschild mit Aufdruck der wesentlichen Spezifikationen der Kanüle
- ▶ Mit 15 mm Drehkonnektor (VARIO), um Zug- und Drehkräfte abzapfen, die durch den Beatmungsschlauch entstehen können
- ▶ Mit Röntgenkontraststreifen
- ▶ Set beinhaltet ein Kanülentrageband, einen Obturator und einen Kanülenpass

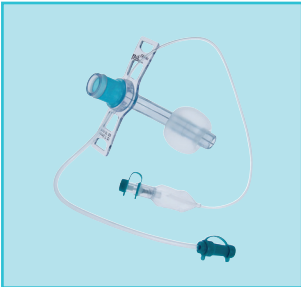

Bestellhinweis:

TRACHEOTEC® VARIO CUFF-SUCTION, Größe 5-10

Bei Bestellung bitte Größe hinter Artikelnummer angeben!



REF 18930

STERILE EO Sterilisation mit Ethylenoxid

Nicht erneut sterilisieren

Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren

Einpatientenprodukt

Gebrauchsanweisung beachten

Rx only ACHTUNG:
Amerikanisches Bundesrecht sieht vor, dass Verkauf, Abgabe und die Anwendung dieses Hilfsmittels nur durch oder auf Anweisung eines Arztes oder geschultem Fachpersonal erfolgen dürfen (in den USA).

CE 0482 CE-Kennzeichnung mit Kennnummer der Benannten Stelle

Größe	A.D. Schild mm	A.D. Spitze mm	I.D. mm	Länge mm (mittl. Radius)	Länge mm	REF
5	7,3	7,3	5,0	55,7	61,1	18930-05
5,5	8,0	8,0	5,5	57,7	63,6	18930-055
6	8,7	8,7	6,0	60,7	67,1	18930-06
6,5	9,3	9,3	6,5	66,6	73,5	18930-065
7	10,0	10,0	7,0	69,6	77,0	18930-07
7,5	10,7	10,7	7,5	73,6	81,5	18930-075
8	11,3	11,3	8,0	79,5	87,9	18930-08
8,5	12,0	12,0	8,5	81,5	90,4	18930-085
9	12,7	12,7	9,0	85,5	94,9	18930-09
10	14,0	14,0	10,0	95,0	105,3	18930-10

A.D. Schild = Außendurchmesser hinter dem Kanülenschild · A.D. Spitze = Außendurchmesser der Außenkanüle an der Kanülenspitze · I.D. = Innendurchmesser an der Kanülenspitze · A-Kanüle = Außenkanüle · I-Kanüle = Innenkanüle
Länge = Länge über Außenbogen · Länge mittlerer Radius = Länge der Mittellinie von Flansch bis Spitze