


TRACHFLOW® METRIC S + L

25 + 50 cm



CE 0482

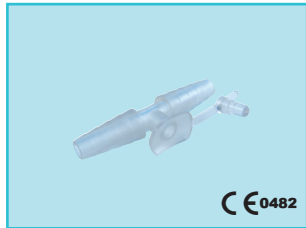

CE 0482

- ▶ Sterile, atraumatische Tracheostoma-Katheter zum schonenden Absaugen von Trachealsekret
- ▶ Mit abgerundeter Spitze, um Verletzungen der Luftröhre zu vermeiden
- ▶ Aus weichem, flexiblem und transparentem Kunststoff
- ▶ Mit zentraler Öffnung und vier seitlichen Öffnungen („Augen“) an der Katheterspitze, um das Festsaugen des Katheters an der Trachealwand während des Absaugvorganges zu verhindern
- ▶ Eine Graduierung in 1-cm-Abständen erlaubt die direkte Kontrolle der Einführtiefe des Absaugkatheters
- ▶ Großes Sortiment (CH 8 - 16)
- ▶ Farbkodierte Konnektoren
- ▶ Zwei verschiedene Längenvarianten verfügbar: 25 cm und 50 cm (die kurze Variante ist besonders geeignet für das tracheale Absaugen)
- ▶ In Verbindung mit dem TRACHFLOW® Fingertip einzusetzen, um die Absaugstärke zu kontrollieren. Mit dem Fingertip wird der Absaugschlauch des Absauggerätes mit dem sterilen Stomakatheter verbunden. Durch die konische Konstruktion passt der TRACHFLOW® Fingertip auf alle Größen der Stomakatheter.

Artikel	Größe	Länge (cm)	Shore	VE	Steril	Atraumatisch	REF
TRACHFLOW® Metric S, 25 cm CH 10-16	8-16	25	A64	30	✓	✓	68630
TRACHFLOW® Metric L, 50 cm CH 10-16	8-16	50	A64	30	✓	✓	68730

Bestellhinweis:

TRACHFLOW® Metric S, 25 cm	CH 8 - 16	Packung mit 30 Stück	REF 68630
TRACHFLOW® Metric L, 50 cm	CH 8 - 16	Packung mit 30 Stück	REF 68730
TRACHFLOW® Finger-Tip		Packung mit 10 Stück	REF 60700