
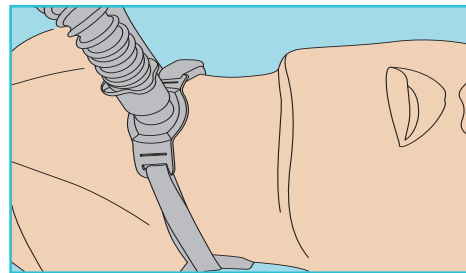
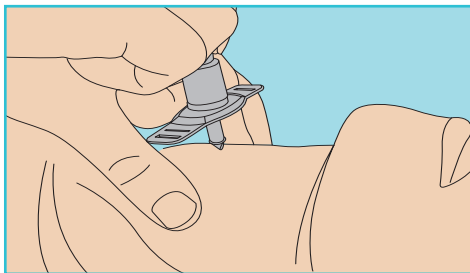


FAHL® KONIOTOMIE-SET

- ▶ Das FAHL® Koniotomie-Set dient dazu, die Atemwege im Notfall (d.h. wenn keine orale Intubation möglich ist) z.B. bei Verlegung durch Fremdkörper (Fremdkörperaspiration), schweren Gesichts- / Nasenverletzungen oder Schwellungen des Kehlkopfes (Larynxödem) zu eröffnen.
- ▶ Im Set enthalten sind:
Koniotomie-Kanüle mit Trokar, flexible Tubusverlängerung, Kanülentrageband, Atraumatischer Absaugkatheter (Ch 10)
- ▶ Die Koniotomie-Kanüle mit Trokar besteht aus einer geradlinigen Kanüle mit einem Beatmungsansatz (15 mm-Konnektor/UNI) sowie einem einsetzbaren Trokar mit integriertem Messer.
- ▶ Die seitlichen Plastikflügel der Kanüle beschränken die Eindringtiefe in die Trachea und vermindern so das Risiko einer Läsion der hinteren Trachealwand.
- ▶ Ein „Fixierwulst“ am Kanülenende dient dazu ein ungewolltes Herausgleiten der Kanüle aus der Trachea zu vermeiden.
- ▶ Wird der Trokar entfernt, kann über den geradlinigen 15 mm-Konnektor (UNI) der Kanüle die Tubusverlängerung, ein Beatmungsbeutel oder ein Beatmungsansatz (Gänsegurgel) zur Beatmung angeschlossen werden.
- ▶ Das Trageband ermöglicht nach erfolgreicher Durchführung der Koniotomie eine Fixierung der Kanüle.

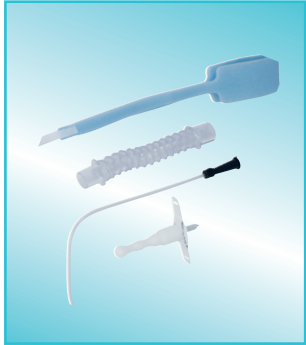

STERILE EO Sterilisation mit Ethylenoxid

⊗ Nicht zur Wiederverwendung

☀ Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren

☂ Trocken aufbewahren

⊗ Bei beschädigter Verpackung nicht zu verwenden

📖 Gebrauchsanweisung beachten

CE 0482 CE-Kennzeichnung mit Kennnummer der Benannten Stelle

Product made in Germany

Bestellhinweis:

FAHL® Koniotomie-SET

REF 75001