
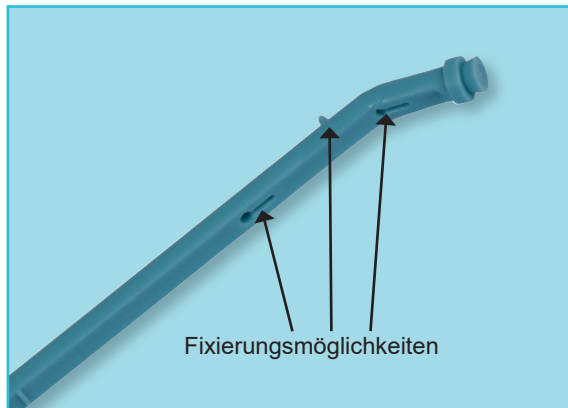



LARYVOX® INSERTER SPECIAL

Anwendung mit Gel-Kapseltechnik

- ▶ LARYVOX® INSERTER SPECIAL dient der optimalen anterograden Platzierung bzw. dem Wechsel eines Shunt-Ventils durch Anwendung der Gel-Kapseltechnik bei
 - ▶ tiefpositionierten oder schräg verlaufenden Fisteln
 - ▶ bei verengtem Fistelkanal
 - ▶ bei besonders kleinem Tracheostoma zur Optimierung der Sichtverhältnisse
- ▶ Das Platzierungsinstrument verfügt über drei unterschiedliche Fixierungsmöglichkeiten um verschiedene Shunt-Ventil-Typen einfach und sicher zu platzieren
- ▶ Durch die Anwendung der Gel-Kapsel-Technik wird ein müheloses Einführen des Shunt-Ventils ermöglicht
- ▶ Mit Hilfe der Gelkapsel wird das Shunt-Ventil atraumatisch in den Shuntkanal eingeführt. Unmittelbar vor der Platzierung kann ein Tropfen wasserlösliches Lokalanästhetikum aufgetragen werden, um die Auflösung der Gelkapsel im Ösophagus zu beschleunigen.

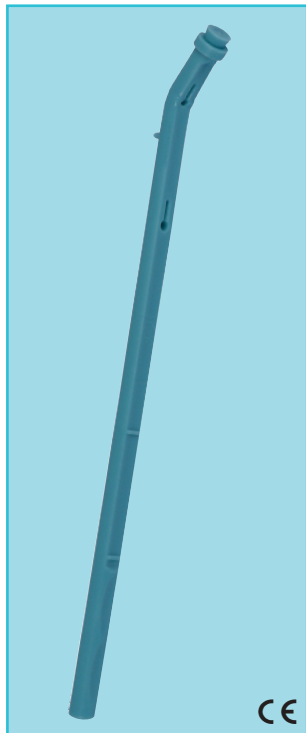

Platzierungsinstrument

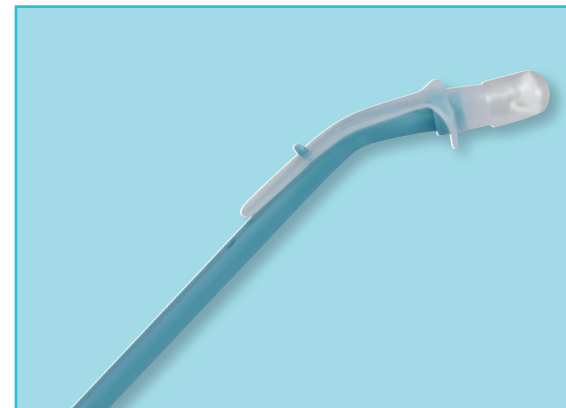

Platzierungsinstrument inkl. Shunt-Ventil und Gel-Kapsel

Bestellhinweis:

LARYVOX® INSERTER SPECIAL

REF 25920

CE