
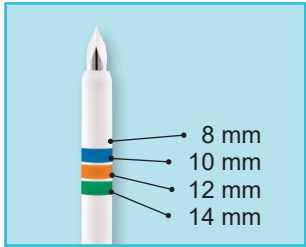


BLOM-SINGER® VOICE PROSTHESIS PLACEMENT SURGICAL KIT

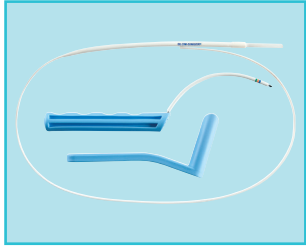

- ▶ Das Surgical Kit von Blom-Singer® ist ein vollständiges, chirurgisches Set zum Einmalgebrauch
- ▶ Dient der intraoperativen Primär- oder Sekundärpunktion zur Anlage eines Blom-Singer® CLASSIC™ Indwelling Shunt-Ventils
- ▶ Es beinhaltet - neben dem separat verpackten Shunt-Ventil folgende Komponenten: Führungskatheter, Trocar (Einmalinstrument), Pharynxprotector (Einmalinstrument)
- ▶ Der Trocar zeichnet sich besonders durch seine 3-seitig geschliffene und dadurch äußerst scharfkantige Spitze aus und ermöglicht so eine leichtgängige Punktion
- ▶ Der Trocar sitzt in einer Hülse, die mit einer Farbcodierung versehen ist. Der Farbcode bietet die Möglichkeit schon während der Punktion die Shuntkanallänge auszumessen und in der Folge das exakt passende Shunt-Ventil auszuwählen
- ▶ Das Blom-Singer® Voice Prosthesis Placement Surgical Kit ist in den Größen 16 Fr. und 20 Fr. erhältlich

Bestellhinweis:

Blom-Singer® Voice Prosthesis Placement Surgical Kit

16 Fr.

REF 28316

Blom-Singer® Voice Prosthesis Placement Surgical Kit

20 Fr.

REF 28317

Bei Bestellung bitte gewünschte Shunt-Ventil-Größe angeben (8-14 mm)!



Einpatientenprodukt



Gebrauchsanweisung beachten