
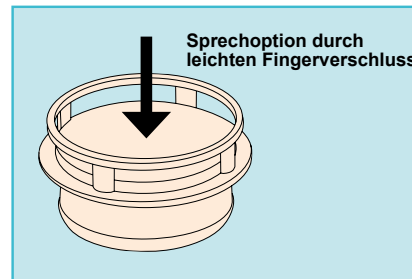
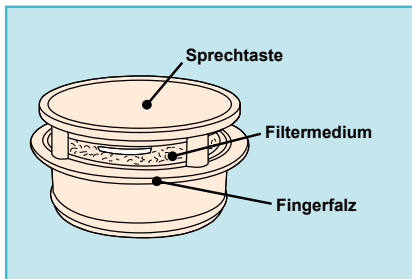


- ▶ HME im diskreten Design mit Sprechoption durch leichten Fingerverschluss
- ▶ LARYVOX® EXTRA HME SPORT durch einen sehr geringen Atemwiderstand für die Anwendung bei sportlichen Aktivitäten geeignet
- ▶ Sehr gute Haptik: Eine abgerundete Vertiefung im Deckel des HMEs vereinfacht den Verschlussmechanismus zusätzlich und macht die optimale Fingerpositionierung sehr gut fühlbar
- ▶ Durch die seitliche Öffnung des LARYVOX® EXTRA HME SPORT wird eine weitgehend ungehinderte und leichte Atmung unterstützt - selbst bei darüber liegender Kleidung
- ▶ Ein Fingerfalz am Gehäuse ermöglicht ein einfaches und schnelles Entfernen des HMEs (z.B. beim Husten)
- ▶ Ein 22 mm Adapter (KOMBI) ermöglicht den Anschluss an alle herkömmlichen Basisplatten (z.B. LARYVOX® TAPE) oder Silikonkanülen für Laryngektomierte (z.B. LARYNGOTEC®)
- ▶ Neben dem LARYVOX® EXTRA HME SPORT sind folgende weitere Varianten verfügbar:

Normal - normaler Atemwiderstand bei normaler körperlichen Anstrengung

Medium - mittlerer Atemwiderstand bei körperlichen Aktivitäten

HighFlow - verringerter Atemwiderstand bei starker körperlicher Belastung

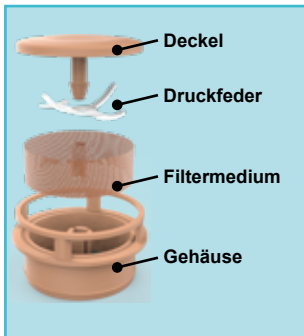

Bestellhinweis:

LARYVOX® EXTRA HME SPORT

Packung mit 30 Stück

REF 49863

LARYVOX® EXTRA HME

Packung mit 30 Stück

REF 49860

LARYVOX® EXTRA HME MEDIUM

Packung mit 30 Stück

REF 49862

LARYVOX® EXTRA HME HighFlow

Packung mit 30 Stück

REF 49861

